

İçerik

KEMİK SEVİYELİ İMPLANT

Sayfa

7

KISA İMPLANT

Sayfa

26

KEMİK SEVİYELİ İMPLANT

Sayfa

39

DİŞ ETİ SEVİYELİ İMPLANT

Sayfa

57

TEK PARÇA İMPLANT

Sayfa

72

TEK PARÇA İMPLANT


Sayfa

73

CERRAHİ VE PROTEZ SETLERİ

Sayfa

75

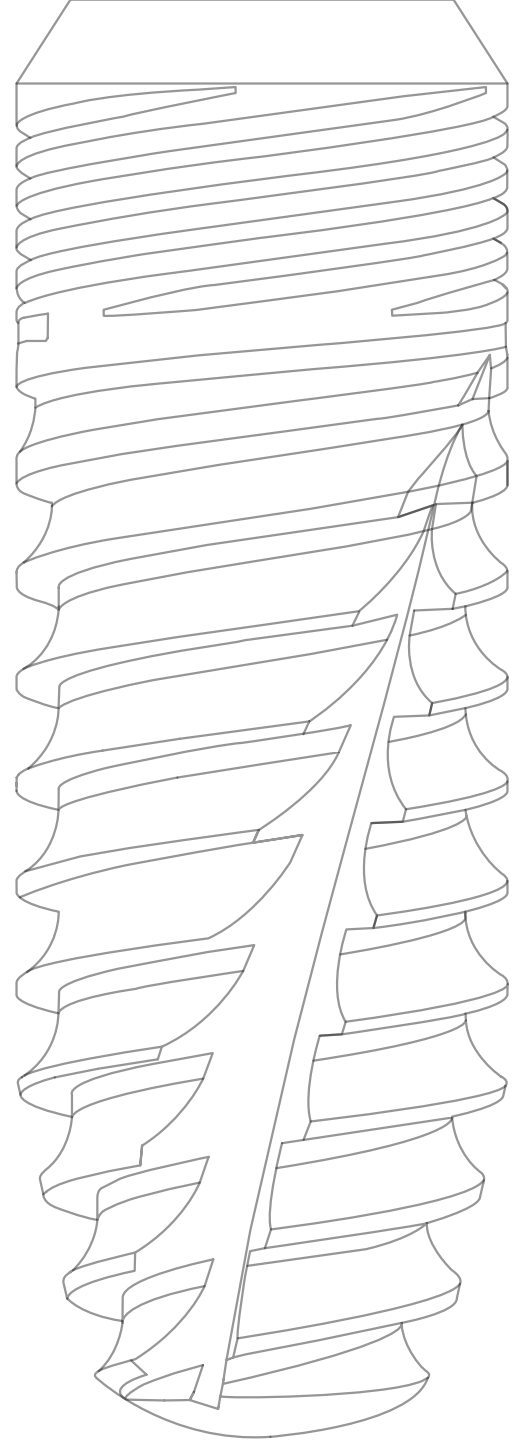

NUCLEOSS İMPLANT SİSTEMİ

GENEL BİLGİ

NucleOSS İmplant Sistemi, güvenli ürün, kaliteli üretim ve kullanım kolaylığı ilkelerinin ışığında etkili çözümler sunmayı hedefleyen kullanıcı dostu bir sistemdir.

Bilgi birikimi ve üretim kalitesini güncel teknolojiyle birleştirerek dünya markaları arasındaki yerini alan NucleOSS, sürekli iyileştirme ve geliştirme ilkesi doğrultusunda kesintisiz AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir.

Kemik seviyeli, doku seviyeli, kısa implant ve mono implant serilerini geniş üst yapı yelpazesiyle tamamlayan NucleOSS tüm protetik tedavilerinize etkili çözümler sunar.

NucleOSS' un tüm çift bileşenli (T6,T5,Tpure,T3) implantları aşağıdaki protetik çözümleri sunar.

Simante Çözümler

T6 İmplant; Düz Dayanak, Estetik Düz Dayanak, Üniversal Dayanak, Teleskobik Dayanak, Açılı Dayanak (15°-25°), Estetik Açılı Dayanak (15°-25°)

T5/Tpure/T3 İmplant; Düz Dayanak, Açılı Dayanak (10°-20°-30°)



Vidalı Çözümler

Tüm çift bileşenli implantlar 0°/17°/30°'li vidalı dayanaklara sahiptir. Tek, çoklu, bar, FixOn4 çözümleri sunar.



Hareketli Protez Çözümleri

Tüm T6,T5,Tpure,T3 implantların Topuz ve Equator® Çözümleri bulunmaktadır.



Kişiyeye Özel Çözümler (Vidalı)

Üniversal döküm dayanaklar tüm çift bileşenli implantlarda bulunur. Hekime döküm yöntemiyle hastaya özel çözümler sunar. Dizayn edilen kron implanta vidayla birleştirilir.



Cad-Cam Çözümler

Bu çözüm de NucleOSS' un tüm çift bileşenli serilerine uygulanabilir. İki farklı Ti-Base seçeneği sunar. Cerec® Ti-Base ile Sirona® , NucleOSS® Ti-Base ile diğer açık sistem tedavileri yapılabilir.




Geçici Parçalar (PEEK)

Tüm NucleOSS çift bileşenli implantlar geçici dayanak ve iyileşme başlığına sahiptir.



maxi cell® Yüzey

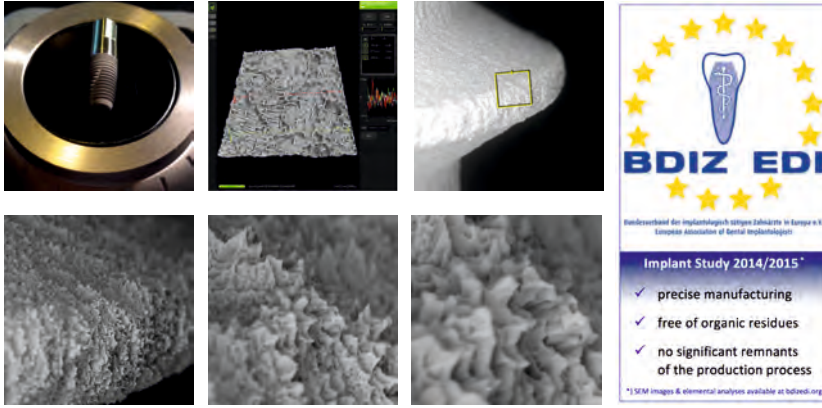

Summary/Conclusions: The implant “*T4 Implant” provided by NucleOSS for this analysis showed a high precision of the outer geometry. Significant traces of inorganic or organic residues were not found.



UNIKLINIK
KÖLN

Dr. Dirk U. Duddeck
Feb. 24, 2015


* 01.01.2016 tarihinden itibaren T4 ismi, Tpure olarak değiştirilmiştir.

FDA | CE | ISO | CLEAN
IMPLANT

*Akıllı Tasarımlar,
Cesur Gülüşler...*





maxi cell® Yüzey

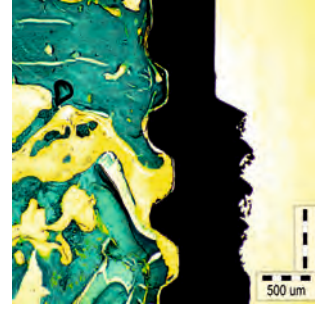

Al₂O₃ kumlanmış saf titanyum (GR-4), termal asitle iki defa yüzey işlemine tabi tutulur. Gövde, yüzey işlemleri sonrasında hidrofilik bir özellik kazanır.

10 yıllık klinik uygulama tecrübesi olan Tpure implant, %97.2 başarı oranına sahiptir.

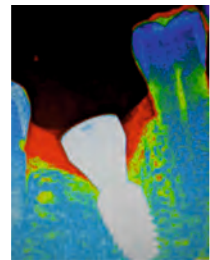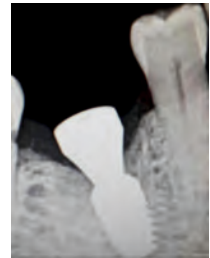

Prof. Dr. M. Kemal ÜNSAL Katkısıyla
(T6 İmplant)



Together for Implantology
Research & Education

Bilimsel Desteğiniz...

TFI, NucleOSS® implantın kurduğu araştırma/geliştirme ve eğitim organizasyondur. Bir başkan ve beş üyeden oluşan bilimsel bir kurul tarafından işleyişi ve faaliyetleri düzenlenir. Diş hekimlerine etik bir çerçevede implantla ilgili fikirlerini, çalışmalarını, bilgilerini paylaşabilmelerini ve implantoloji alanının gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.

Dental implant uygulaması yapan klinisyenler, dental implant ile ilgilenen araştırmacılar ve bu konuda çalışan istekli firmaların bilimsel, sektörel ve klinik bilgilerini paylaşabilecekleri ve bu paylaşım sonucunda farklı bakış açıları kazanabilecekleri bir platformdur. TFI üyeliğinde giriş ve aidat ücreti yoktur.



Taze Kadavra Kursu / ANKARA



TFI Hücre Kültür Laboratuvarı





TFI Uygulamalı Kurs Laboratuvarı

NucleOSS PROTEZ

NE | NE İLE | NE KADAR



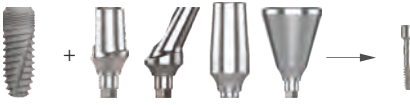
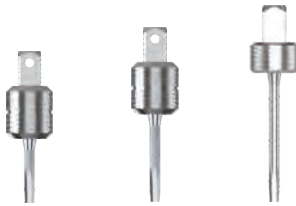


NE	NE İLE	NE KADAR
Tüm Kapaklar ve İyileşme Başlıkları  T6 / T5 / Tpure / T3 Serilerine ait tüm implant kapakları ve iyileşme başlıklarını taşıyıp sıkmak için	 TO 2013 TO 25251	ELLE / RAŞETLE (Raşet Kullanılacak ise 10 Ncm)
Tüm Simante Dayanak Vidaları  İmplant (T6 / T5 / Tpure / T3) + Tüm Simante Dayanaklar	 TO 2011 TO 2010 TO 25252	Max. 30 Ncm
Geçici (PEEK) Parçalar ve Vidalar  İmplant (T6 / T5 / Tpure / T3) + Tüm Geçici (PEEK) Parçalar	TO 2011 TO 2010 TO 25252	10 Ncm
Multi Unit Dayanaklar (Düz / 0°)  İmplant (T6 / T5 / Tpure / T3) + Tüm Multi Unit Dayanaklar	 TO 25206 / TO 2003	Max. 30 Ncm
Multi Unit Dayanaklar (17° ve 30°)  İmplant (T6 / T5 / Tpure / T3) + Tüm Multi Unit Dayanaklar	 TO 2011 TO 2010 TO 25252	Max. 30 Ncm

NucleOSS PROTEZ

NE | NE İLE | NE KADAR

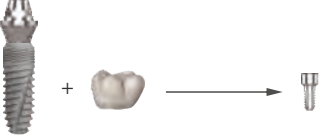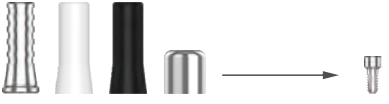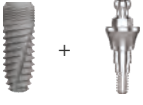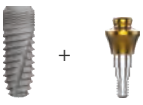

NE	NE İLE	NE KADAR
Tüm Multi Unit Dayanaklar 		20 Ncm
Tüm Kep Vidaları  Titanyum Kep / Burn-Out Kep / Komfort Kep	   TO 2011 TO 2010 TO 25252	10 Ncm
Tüm Universal Döküm Dayanak Vidaları  İmplant (T6 / T5 / Tpure / T3) + Tüm Universal Döküm Dayanaklar		Max. 30 Ncm
Topuz Dayanaklar  İmplant (T6 / T5 / Tpure / T3) + Tüm Topuz Dayanaklar	 TO 25205 / TO 2004	Max. 30 Ncm
Equator® Dayanaklar  İmplant (T6 / T5 / Tpure / T3) + Tüm Equator® Dayanaklar	 774CHE	Max. 30 Ncm
Cad-Cam Ti-Base Dayanak Vidaları  İmplant (T6 / T5 / Tpure / T3) + Tüm Cad-Cam Ti-Base Dayanaklar	   TO 2011 TO 2010 TO 25252	Max. 30 Ncm

Akıllı Tasarımlar

cesur gülüşler



T6

Kemik Seviyeli İmplant

Modern ve estetik detaylarla tasarlanan T6 kemik seviyeli implant; güvenli cerrahi protokolü ile hekime ve hastaya konforlu cerrahi süreci sunar. Geniş üst yapı yelpazesi ile cesur gülüşler kazandırır. Gülümseten tasarımları, ileri düzeydeki dayanım gücü ile özgüveninizi tazeler...

Mor rengin tonlarını göz alıcı halde çiçeklerine yansıtan acıçığdem çiçeği; panzehire benzeyen etkisiyle doğru yöntem ve miktarda kullanıldığında ağrı kesici ve iyileştirici bir devaya dönüşür.




NucleOSS™

T6 much more implant

Vidanın gevşemesini önleyen
vida-abutment bağlantı yüzeyi:
Vida 30 Ncm ile sıkılmalıdır.

Etkin platform switch

Daha fazla kemik için
açılı yüzey

Güçlü yan duvar

Mikro yivler

Açılı temas bölgeleri

1. temas bölgesi (20°):

Abutment'a gelen kuvvetlerin (yan/dik)
eşit şekilde gövdenin tamamına dağıtılmasını
sağlar. Ayrıca yan kuvvetlerde, abutment
mikro hareketini engeller.


2. temas bölgesi (15°):

Abutment dan gelen dik
kuvvetler, boyun bölgesinden
daha aşağıdaki (H=2.0 mm)
bu bölgede karşılanır. Olası
kemik erimesi durumunda;
açığa çıkan boyun bölgesi,
derindeki ikinci temas bölgesi
sayesinde daha az etkilenir.

Çift sarmal (double thread) ve
reverse buttress vida adımı
sayesinde implant, hazırlanan
yuvaya daha hızlı ve daha az tur
sayısında yerleşir.

Kesme yüzeyleri

İmplant boyunca uzanan
kemik toplanma alanı

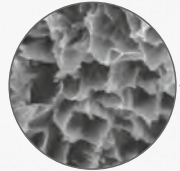

maxicell® Yüzey

Kilitli Steril Tüp Kapağı


Askı Kapağı

İmplant Gövde


TiGr-5 Titanyum Taşıyıcı

Taşıyıcı Askı

İmplant Kapağı

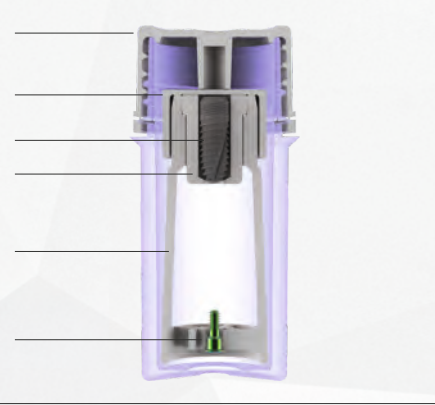

Kilidi kopmuş veya açılmış ürünleri kullanmayınız!

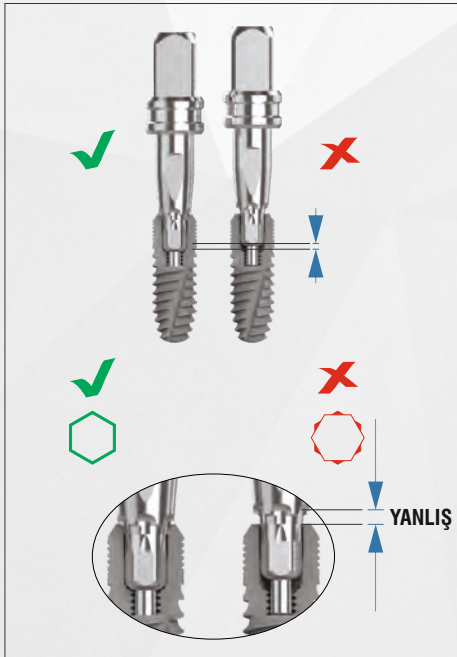



Taşıma ve Sıkma Parçası:

- ▶ İmplantı steril tüpten hasta ağızına taşıırken, taşıma ve sıkma parçası implant yuvasına **TAM ve DOĞRU POZİSYONDA** oturmalıdır.
- ▶ Aksi takdirde taşıma parçası yeterli teması sağlayamadığı için implant düşebilir veya implantın hex yatağını bozabilir.
- ▶ *Sayfa 24'de gösterilen D1/D2/D3/D4 kemikte drill protokolü mutlaka uygulanmalıdır.

* Lütfen sayfa 24'deki drill protokolüne bakınız.


İmplant Kapağı Taşıma:

İmplant kapağını askıdan alırken; hex anahtarı kapağa tam olarak yerleştirilir ve **aynı eksen**de sağa sola çevirmeden **geri çekilir**.

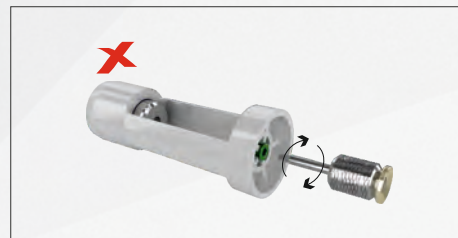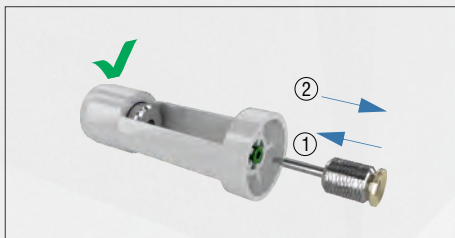

Boyun bölgesindeki kemiğin sağlıklı oluşması için; cerrahi frezin kemikte açtığı yuva, implant boyundan **0,7mm** daha uzundur!

▶ Cerrahi planlamada bunu dikkate alınız.

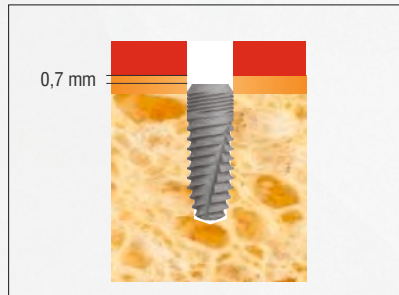

T6 CERRAHİ

KEMİK SEVİYELİ İMPLANT

GÖVDELER

T6 32150



Ø 3.5

L: 8 T6 3508
L:10 T6 3510
L:12 T6 3512
L:14 T6 3514

T6 32151



Ø 4.1

L: 8 T6 4108
L:10 T6 4110
L:12 T6 4112
L:14 T6 4114

T6 32152



Ø 4.8

L: 8 T6 4808
L:10 T6 4810
L:12 T6 4812
L:14 T6 4814



Dar Platform (4.3 mm / NR)



Standart Platform (5.0 mm / SD)



Geniş Platform (6.0 mm / WD)

İyileşme Başlığı Renk Kodu

NR (Dar Platform)
SD (Standart Platform)
WD (Geniş Platform)

T6 serisindeki kapak ve iyileşme başlıkları tüm çaplara uyumludur, ancak yerleştirilen implant çapını belirten renk koduna sahiptir.

İyileşme Başlığı - Abutment Uyumu

İyileşme Başlığı (h)	Abutment (h)
2.0 mm	1.0 mm
4.0 mm	2.0/3.0 mm
6.0 mm	4.0/5.0 mm

Kronun protetik platform çapını önceden planlayıp iyileşme başlığını ona göre belirleyiniz. İyileşme başlıkları ve simante abutmentlerin tabloda gösterildiği gibi kullanılması tavsiye edilir. Bu sayede iyileşme başlığının şekillendirdiği anatomiye uygun abutment kullanarak yumuşak doku - abutment uyumunu bozmadan iyi bir "platform switch" etkisi oluşturabilir ve hastanıza konforlu bir protez süreci sağlayabilirsiniz.



T6 PROTEZ

SİMANTE ÇÖZÜMLER

DÜZ DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Standart Düz Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)

	Ti Gr5	4.3	1.0	T6 NR040
			2.0	T6 NR041
			3.0	T6 NR042
			4.0	T6 NR043
			5.0	T6 NR044
	Ti Gr5	5.0	1.0	T6 SD045
			2.0	T6 SD046
			3.0	T6 SD047
			4.0	T6 SD048
			5.0	T6 SD049
	Ti Gr5	6.0	1.5	T6 WD050
			3.0	T6 WD051
			4.5	T6 WD052

Universal Düz Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)

HEX		Ti Gr5	4.3	T6 NR001
			5.0	T6 SD002
			6.0	T6 WD003
NO-HEX		Ti Gr5	4.3	T6 NR004
			5.0	T6 SD005
			6.0	T6 WD006

Teleskobik Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)

Tüm çaplarda kullanılır. 30° ye kadar açıldırılabilir.		Ti Gr5	T6 32035
---	---	--------	----------

T6 PROTEZ

SİMANTE ÇÖZÜMLER

DÜZ DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Estetik Düz Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)

	Ti Gr5	4.3	1.0/2.0	T6 NR005
			2.0/3.0	T6 NR006
	Ti Gr5	5.0	1.0/2.0	T6 SD007
			2.0/3.0	T6 SD008
	Ti Gr5	6.0	1.5/2.5	T6 WD009
			2.5/3.5	T6 WD010

Geçici Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)

HEX		PEEK	5.0	T6 32022
NO-HEX		PEEK	5.0	T6 32023

Geçici İyileşme Başlığı (Tüm çaplarla uyumludur)

	PEEK	6.0	T6 32034
---	------	-----	----------

T6 PROTEZ

SİMANTE ÇÖZÜMLER

AÇILI DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Açılı Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)					
 15°	 15°	Ti Gr5	4.3	1.0	T6 NR120
				2.0	T6 NR121
				3.0	T6 NR122
				4.0	T6 NR123
 15°	 15°	Ti Gr5	5.0	1.0	T6 SD128
				2.0	T6 SD129
				3.0	T6 SD130
				4.0	T6 SD131
 25°	 25°	Ti Gr5	5.0	1.0	T6 SD132
				2.0	T6 SD133
				3.0	T6 SD134
				4.0	T6 SD135
 15°	 15°	Ti Gr5	6.0	1.5	T6 WD136
				3.0	T6 WD137
				5.0	T6 WD138
				1.5	T6 WD140
 25°	 25°	Ti Gr5	6.0	3.0	T6 WD141
				5.0	T6 WD142

★ 4.3 platform Açılı Dayanakların sadece 15° seçeneği bulunmaktadır.

T6 PROTEZ

SİMANTE ÇÖZÜMLER

AÇILI DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Estetik Açılı Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)



15°

Ti Gr5

4.3

1.0/2.0	T6 NR101
2.0/3.0	T6 NR102
3.0/4.0	T6 NR103



15°

Ti Gr5

5.0

1.0/2.0	T6 SD109
2.0/3.0	T6 SD110
3.0/4.0	T6 SD111



25°

Ti Gr5

5.0

1.0/2.0	T6 SD112
2.0/3.0	T6 SD113
3.0/4.0	T6 SD114



15°

Ti Gr5

6.0

2.0/3.0	T6 WD117
---------	----------



25°

Ti Gr5

6.0

2.0/3.0	T6 WD118
---------	----------

* 4.3 platform Estetik Açılı Dayanakların sadece 15° seçeneği bulunmaktadır.

T6 PROTEZ

SİMANTE ÇÖZÜMLER

DİĞER PARÇALAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

İyileşme Başlıkları (Tüm çaplarla uyumludur)

	Ti Gr5	4.3	2.0	T6 NR512
			4.0	T6 NR513
			6.0	T6 NR514
	Ti Gr5	5.0	2.0	T6 SD515
			4.0	T6 SD516
			6.0	T6 SD517
	Ti Gr5	6.0	2.0	T6 WD518
			4.0	T6 WD519
			6.0	T6 WD520

Ti-Base İyileşme Başlıkları

	Ti Gr5	4.0	T6 32510
	Ti Gr5	6.0	T6 32511

* Tüm (Universal, Cad-Cam NucleOSS ve Cad-Cam Cerec®) Ti-Base Abutmentlar ile uyumludur.

Ölçü Kepleri (Standart dayanak üstünden)

Standart Dayanak Ölçü Kebi Protetik Platform Çapı 4.3 mm			T0 32909
Standart Dayanak Ölçü Kebi Protetik Platform Çapı 5.0 mm			T0 32910
Standart Dayanak Ölçü Kebi Protetik Platform Çapı 6.0 mm			T0 32911
Ölçü Kebi Tüm kapalı ölçü parçaları için		4'lü pakette (ekstra)	T0 32912

T6 PROTEZ

SİMANTE ÇÖZÜMLER

DİĞER PARÇALAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Ölçü Parçaları (Tüm çaplarla uyumludur)

Kapalı ölçü parçası



Ti Gr5

T6 32611

Açık ölçü parçası (HEX)



Ti Gr5

T6 32604

Açık ölçü parçası (NO-HEX)
Açılı yerleştirilmiş gövdeler için



Ti Gr5

T6 32605

Analog (Tüm çaplarla uyumludur)



Paslanmaz çelik

T6 32201

Bağlantı Vidaları

Simante dayanaklar ve kapalı ölçü parçaları için



Ti Gr5

T6 16000

T6 32604 ve T6 32605 açık ölçü parçası için



Ti Gr5

T6 16002

Kapalı kaşık klasik yöntem ile ölçü alma vidası



Ti Gr5

T6 16006

T6 PROTEZ

VİDALI ÇÖZÜMLER

MULTİ ÜNİT ve VİDALI DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Multi Unit Dayanak | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex (Tüm çaplarla uyumludur)

	0°	Ti Gr5	5.0	1.5	T6 32431
				3.0	T6 32432
				5.0	T6 32433
	17°			1.5/3.1	T6 32434
				2.4/4.0	T6 32435
	30°			1.25/4.0	T6 32436
				2.0/4.75	T6 32437

Konfor Kep T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32905
Multi Unit Cad-Cam Tarama Parçası		PEEK			T0 32033
Multi Unit Ti-Base Dayanak		Ti Gr5			T0 32808
Titanyum Kep (No-Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32908
Burn out kep (No-Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		PVC			T0 32901
Ölçü Parçası (kapalı / No-Hex) T0 16003 vidası ve T0 32912 kebi ile birlikte		Ti Gr5			T0 32607
Ölçü Parçası (açık / No-Hex) T0 16004 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32608
Multi Unit Analog (No-Hex)		Paslanmaz çelik			T0 32202
Ölçü Parçası (Kapalı Kaşık) kebi		PVC			T0 32912
İmplant - Multi Unit bağlantı vidası		Ti Gr5			T6 16005
Multi Unit Dayanak için okluzal vida		Ti Gr5			T0 16003
Ölçü Parçası (Açık Kaşık) için vida		Ti Gr5			T0 16004

T6 PROTEZ

VİDALI ÇÖZÜMLER

MULTİ UNİT ve VİDALI DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Multi Unit Dayanak | Tek Diş Uygulamaları | Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



0°

Ti Gr5

5.0

1.5	T6 32438
3.0	T6 32439
5.0	T6 32440

Konfor Kep
T0 16003 vidasıyla birlikte



Ti Gr5

T0 32905

Titanyum Kep (Hex)
T0 16003 vidasıyla birlikte



Ti Gr5

T0 32904

Burn out kep (Hex)
T0 16003 vidasıyla birlikte



PVC

T0 32902

Ölçü Parçası (kapalı / Hex)
T0 16003 vidası ve T0 32912 kebi ile birlikte



Ti Gr5

T0 32609

Ölçü Parçası (açık / Hex)
T0 16004 vidasıyla birlikte



Ti Gr5

T0 32610

Multi Unit Analog (Hex)



Paslanmaz çelik

T0 32203

Ölçü Parçası
(Kapalı Kaşık) kebi



PVC

T0 32912

İmplant - Multi Unit
bağlantı vidası



Ti Gr5

T6 16005

Multi Unit Dayanak için
okluzal vida



Ti Gr5

T0 16003

Ölçü Parçası
(Açık Kaşık) için vida



Ti Gr5

T0 16004

T6 PROTEZ

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

UNİVERSAL DÖKÜM DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Universal Ti-Base Döküm Dayanak | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

4.0

T6 32800

Universal Ti-Base Döküm Dayanak | Tek Diş Uygulamaları | Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

4.0

T6 32801

Diğer Yardımcı Parçalar

Kapalı ölçü parçası



Ti Gr5

T6 32611

Açık ölçü parçası (HEX)



Ti Gr5

T6 32604

Açık ölçü parçası (NO-HEX)
Açılı yerleştirilmiş gövdeler için



Ti Gr5

T6 32605

Analog



Paslanmaz çelik

T6 32201

Döküm Kebi, T6 16001
vidayla birlikte



Ti Gr5

T6 32907



PVC

T0 32907



Ti Gr5

T6 16001

T6 PROTEZ

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

CAD-CAM DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Cad-Cam NucleOSS Ti-Base Dayanak | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

4.5

0.7 T6 32805

2.4 T6 32807

Cad-Cam NucleOSS Ti-Base Dayanak | Tek Diş Uygulamaları | Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

4.5

0.7 T6 32804

2.4 T6 32806

Tarama Gövdesi | İmplant-Analog Üstünden | PEEK (Tüm çaplarla uyumludur)



PEEK

T6 32897

Cad-Cam Cerec® Ti-Base Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)

Tarama postu ile birlikte



Ti Gr5

4.5

T6 32802

Tarama postu (4'lü paket)



T0 32949

Cerec® Sirona'nın tescilli markasıdır.

Premill Abutment



Ti Gr5

T6 PR01



T6 16000 ile gönderilir.

T6 PROTEZ

HAREKETLİ PROTEZ ÇÖZÜMLERİ

TOPUZ DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Topuz Dayanak Metal Yüzük ve Silikon Halka ile Birlikte		Ti Gr5	4.5	1.5	T6 32301
				3.0	T6 32302
				5.0	T6 32303
Ölçü Parçası		Ti Gr5			T0 32615
Analog		Paslanmaz çelik			T0 4521
Kapalı metal yuva ve plastiği					T0 5207
Kapalı metal yuva plastiği (sarı-orta sert)	 net: 500 gr	4'lü pakette			T0 4500-16
Kapalı metal yuva plastiği (turuncu-yumuşak)	 net: 350 gr	4'lü pakette			T0 4500-7
Metal yüzük ve silikon halkayla birlikte					T0 5200
Metal yüzük silikon halkası (siyah-orta sert)		4'lü pakette			T0 4500-3
Metal kadeh ve plastikte birlikte					T0 5201
Metal Kadeh Plastiği		4'lü pakette			T0 4500-4
Topuz Abutment Ölçü Parçası Silikonu		4'lü pakette			T0 4500-18

T6 PROTEZ

HAREKETLİ PROTEZ ÇÖZÜMLERİ

EQUATOR® DAYANAKLAR


Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Equator® Dayanak Metal Yuva ve kepleriyle birlikte		Ti Gr5	4.5	1.5 3.0 5.0	T6 32700 T6 32701 T6 32702
Ölçü Parçası		Ti Gr5			044CAIN
Analog		Paslanmaz çelik			144AE
Equator® metal yuva		4'lü pakette			CA008
Şeffaf / Ekstra Sert	 1,8 kg	4'lü pakette			CN051
Pembe / Standart Sert	 1,2 kg	4'lü pakette			CN052
Sarı / Yumuşak	 0,6 kg	4'lü pakette			CN053
Siyah / Laboratuvar için Kep	 4'lü pakette				CN068
Kare sıkma anahtarı (Raşet)					774CHE
Motor sıkma					760CE
Kep takma anahtarı					124ICP-N
Metal yuvadan kep çıkarma aparatı					191ECS

Equator® Abutment Rhein 83 'ün tescilli markasıdır.


GÜVENLİ CERRAHİ

Standart T6 cerrahi ve protez seti, güvenli ve kolay bir cerrahi sunacak şekilde tasarlanmıştır.

- ✓ Her çap ve boyda stoperli frez
- ✓ Her çap için sert kemik frezleri
- ✓ Her çapa uygun kemik yoğunlaştıncı
- ✓ Renk kodlaması

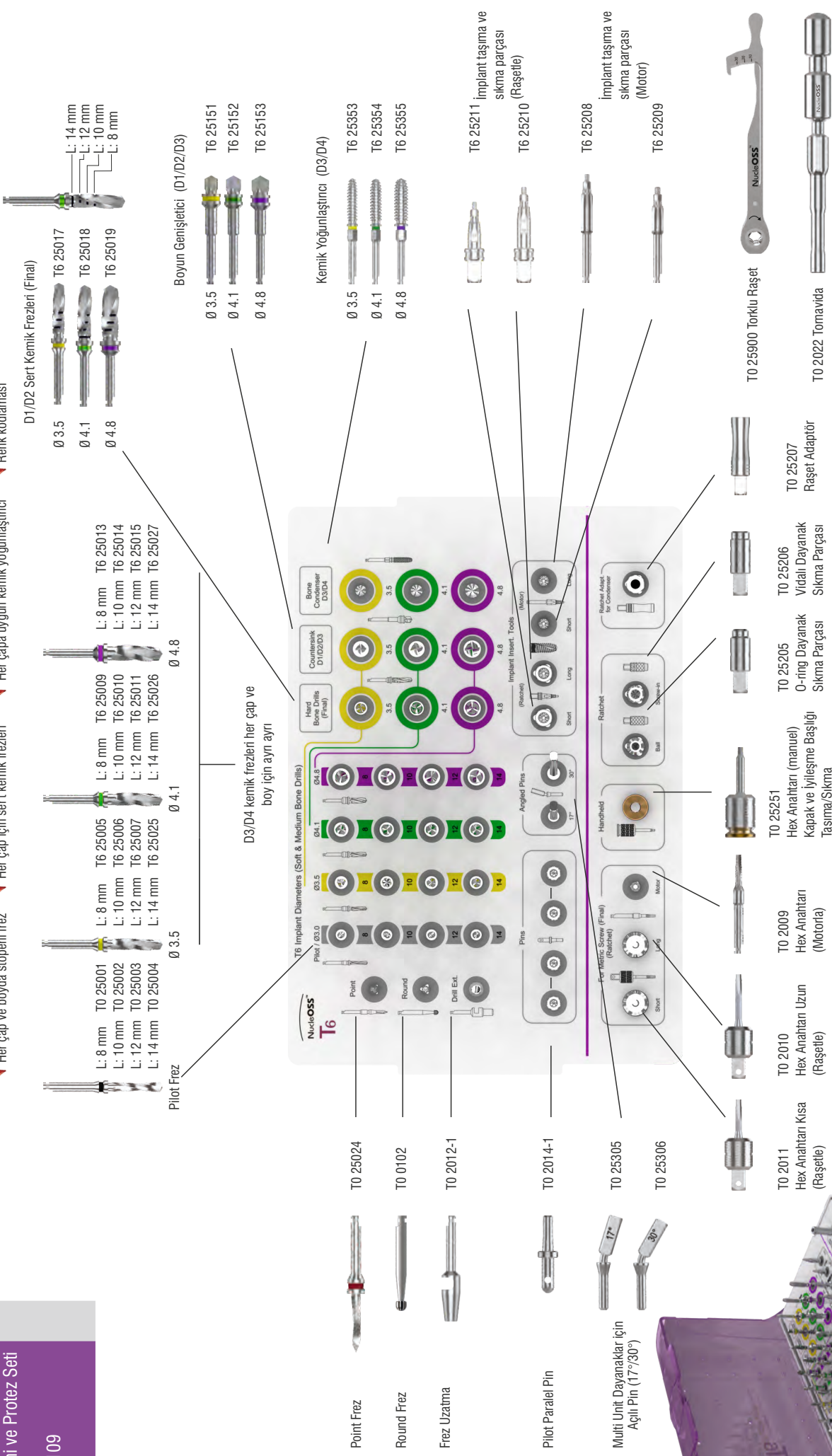


Ø 3.5 L: 12 mm

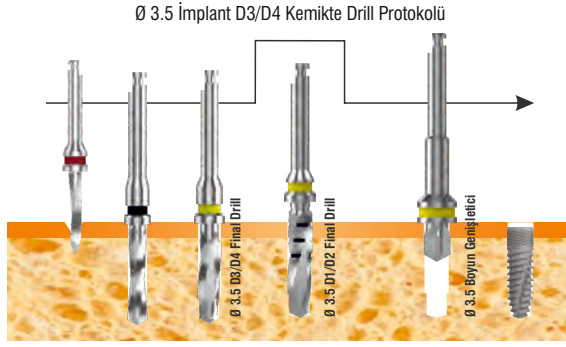


Ø 3.5 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Ø 4.1 L: 12 mm

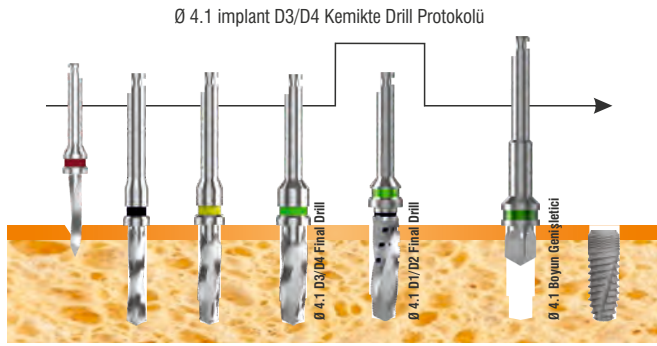

Ø 4.1 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Ø 4.8 L: 12 mm

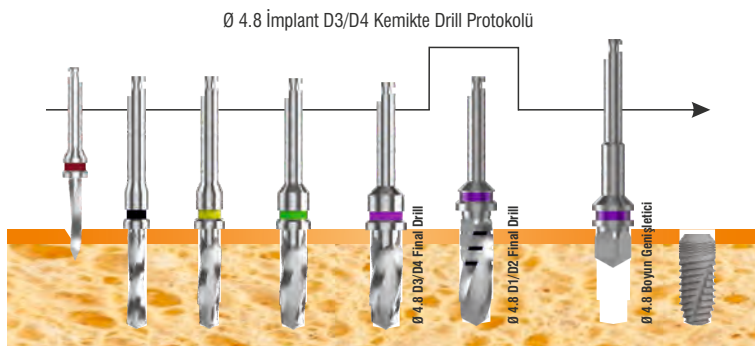

Ø 4.8 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Az risk

pratik çözüm



T5

Kısa İmplant

T5, tasarımı sayesinde, dikey yönde kemik kaybı fazla olan vakalarda kolay ve pratik çözümler sunar. Bu sayede hasta açısından operasyonun karmaşıklığına bağlı olarak karşılaşılabilecek sorunları ortadan kaldırmak ve hastaya daha ekonomik bir seçenek sunabilmek mümkündür.

Kardelenler, tıbbi açıdan önemli bitkilerdendir. Kısa boylu bodur olarak tabir edilirler. Zor koşullarda kolayca yetişebilen, -15°C sıcaklıktan bile etkilenmeyen kardelenler, soğuk ve karlı kış günlerinde çiçek verebilen oldukça dayanıklı bitkilerdir.



Simante Çözümler

Vidalı Çözümler

Hareketli Protez Çözümleri

Kişiyi Özel Çözümler
(Döküm Yöntemi ile)

Kişiyi Özel Çözümler
(Cad-Cam ile)

İyileşme Başlıkları

Ölçü Parçaları

Analoglar

Geçici Parçalar (PEEK)


NucleOSS™



Ø 4.8




Ø 4.8 Kısa İmplant		Paket İçeriği	
Kodu	Hammadde		
T5 4805	Ti Gr4		
T5 4806			
T5 4807			

Ø 5.5



Ø 5.5 Kısa İmplant		Paket içeriği	
Kodu	Hammadde		
T5 5505	Ti Gr4		
T5 5506			
T5 5507			

Ø 6.2

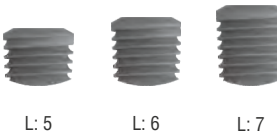

Ø 6.2 Kısa İmplant		Paket İçeriği	
Kodu	Hammadde		
T5 6205	Ti Gr4		
T5 6206			
T5 6207			

T5 CERRAHİ


KISA İMPLANT DİĞER PARÇALAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	-----------------------------	---------------------------------	-----

İyileşme Başlığı (Tüm çaplarla uyumludur)

		Ti Gr5	5.8	2.0	T5 5852
				3.0	T5 5853
				5.0	T5 5855

Ölçü Parçaları (Tüm çaplarla uyumludur)

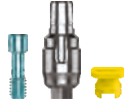Kapalı ölçü parçası					T5 4940-1
Açık ölçü parçası (HEX)		Ti Gr5	5.8		T5 4940
Açık ölçü parçası (NO-HEX)					T5 4941
					T5 2000
					T5 2001

Analog (Tüm çaplarla uyumludur)

Analog		Paslanmaz Çelik	5.8		T5 5820
--------	---	-----------------	-----	--	---------

T5 PROTEZ

SİMANTE ÇÖZÜMLER

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	-----------------------------	------------------------------	-----

Düz Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

5.8

1.0	T5 5801
2.0	T5 5802
3.0	T5 5803

Açılı Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)



10° - 20° - 30°

Ti Gr5

5.8

2.0	T5 5812-10
4.0	T5 5814-10
2.0	T5 5812-20
4.0	T5 5814-20
2.0	T5 5812-30
4.0	T5 5814-30

Geçici Dayanak | PEEK (Tüm çaplarla uyumludur)

HEX



PEEK

5.0

T5 32022

NO-HEX



PEEK

5.0

T5 32023

Geçici İyileşme Başlığı | PEEK (Tüm çaplarla uyumludur)



PEEK

6.0

T5 32034

T5 PROTEZ

VİDALI ÇÖZÜMLER

MULTİ ÜNİT DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Multi Unit Dayanaklar | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex (Tüm çaplarla uyumludur)

		0°	Ti Gr5	5.0	1.5 T5 5041 3.0 T5 5042 5.0 T5 5043
		17°	Ti Gr5	5.0	1.50/3.1 T5 5541-17 2.4/4.0 T5 5542-17
		30°	Ti Gr5	5.0	1.25/4.0 T5 5543-30 2.0/4.75 T5 5544-30
Konfor Kep T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32905
Multi Unit Cad-Cam Tarama Parçası		PEEK			T0 32033
Multi Unit Ti-Base Dayanak		Ti Gr5			T0 32808
Titanyum Kep (No-Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32908
Burn out kep (No-Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		PVC			T0 32901
Ölçü Parçası (kapalı / No-Hex) T0 16003 vidası ve T0 32912 kebi ile birlikte		Ti Gr5			T0 32607
Ölçü Parçası (açık / No-Hex) T0 16004 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32608
Multi Unit Analog (No-Hex)		Paslanmaz çelik			T0 32202
Ölçü Parçası (Kapalı Kaşık) kebi		PVC			T0 32912
İmplant - Multi Unit bağlantı vidası		Ti Gr5			T5 2004
Multi Unit Dayanak için okluzal vida		Ti Gr5			T0 16003
Ölçü Parçası (Açık Kaşık) için vida		Ti Gr5			T0 16004

T5 PROTEZ

VİDALI ÇÖZÜMLER

MULTİ ÜNİT DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Multi Unit Dayanaklar | Tek Diş Uygulamaları | Hex (Tüm çaplarla uyumludur)

	0°	Ti Gr5	5.0	1.5	T5 5044
				3.0	T5 5045
				5.0	T5 5046
Konfor Kep T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32905
Titanyum Kep (Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32904
Burn out kep (Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		PVC			T0 32902
Ölçü Parçası (kapalı / Hex) T0 16003 vidası ve T0 32912 kebi ile birlikte		Ti Gr5			T0 32609
Ölçü Parçası (açık/Hex) T0 16004 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32610
Multi Unit Analog (Hex)		Paslanmaz çelik			T0 32203
Ölçü Parçası (Kapalı Kaşık) kebi		PVC			T0 32912
İmplant - Multi Unit bağlantı vidası		Ti Gr5			T5 2004
Multi Unit Dayanak için okluzal vida		Ti Gr5			T0 16003
Ölçü Parçası (Açık Kaşık) için vida		Ti Gr5			T0 16004

T5 PROTEZ

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER UNİVERSAL DÖKÜM DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Universal Ti-Base Döküm Dayanaklar | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

5.0

T5 5080

Universal Ti-Base Döküm Dayanaklar | Tek Diş Uygulamaları | Hex (Tüm çaplarla uyumludur)




Ti Gr5

5.0

T5 5081


Kapalı ölçü parçası

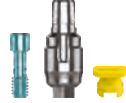

Ti Gr5

T5 4940-1


Açık ölçü parçası

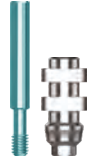

Ti Gr5

T5 4940

Açık ölçü parçası (NO-HEX)
Açılı yerleştirilmiş gövdeler için

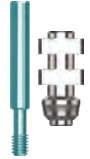

Ti Gr5

T5 4941

Analog



Paslanmaz çelik

T5 5820

Döküm Kebi, T5 16001
vidayla birlikte



Ti Gr5

T5 32907



PVC

T0 32907



Ti Gr5

T5 16001

T5 PROTEZ

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER
CAD-CAM DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Cad-Cam NucleOSS Ti-Base Dayanak | Tek Diş Uygulamaları | Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

5.0

T5 32806

Cad-Cam NucleOSS Ti-Base Dayanak | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

5.0

T5 32807

Tarama Gövdesi | İmplant-Analog Üstünden | PEEK (Tüm çaplarla uyumludur)



PEEK

T5 32897

Cad-Cam Cerec® Ti-Base Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)

Tarama postu ile birlikte



Ti Gr5

5.0

T5 32803

Tarama postu (4'lü paket)



T0 32949



T5 2000

Cerec® Sirona'nın tescilli markasıdır.

T5 PROTEZ

HAREKETLİ PROTEZ ÇÖZÜMLERİ

TOPUZ DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Topuz Dayanak Metal Yuva ve kep birlikte		Ti Gr5	5.0	1.5	T5 5030
				3.0	T5 5031
				5.0	T5 5032
Ölçü Parçası		Ti Gr5			T0 32615
Analog		Paslanmaz çelik			T0 4521
Kapalı metal yuva ve plastiği					T0 5207
Kapalı metal yuva plastiği (sarı-orta sert)	 net: 500 gr	4'lü pakette			T0 4500-16
Kapalı metal yuva plastiği (turuncu-yumuşak)	 net: 350 gr	4'lü pakette			T0 4500-7
Metal yüzük ve silikon halkayla birlikte					T0 5200
Metal yüzük silikon halkası (siyah-orta sert)		4'lü pakette			T0 4500-3
Metal kadeh ve plastikte birlikte					T0 5201
Metal Kadeh Plastiği		4'lü pakette			T0 4500-4
Topuz Abutment Ölçü Parçası Silikonu		4'lü pakette			T0 4500-18

T5 PROTEZ

HAREKETLİ PROTEZ ÇÖZÜMLERİ EQUATOR® DAYANAKLAR


Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Equator® Dayanak Metal Yuva ve kepleriyle birlikte		Ti Gr5	5.0	1.5	T5 5070
				3.0	T5 5071
				5.0	T5 5072
Ölçü Parçası		Ti Gr5			044CAIN
Analog		Paslanmaz çelik			144AE
Equator® metal yuva		4'lü pakette			CA008
Şeffaf / Ekstra Sert		1.8 kg 4'lü pakette			CN051
Pembe / Standart Sert		1.2 kg 4'lü pakette			CN052
Sarı / Yumuşak		0.6 kg 4'lü pakette			CN053
Siyah / Laboratuvar için Kep		4'lü pakette			CN068
Kare sıkma anahtarı (Raşet)					774CHE
Motor sıkma					760CE
Kep takma anahtarı					124ICP-N
Kep çıkarma aparatı					191ECS

Equator® Abutment Rhein 83 'ün tescilli markasıdır.

GÜVENLİ CERRAHİ


Standart T5
Cerrahi ve Protez Seti
CRH-106-1

Standart T5 cerrahi ve protez seti, güvenli ve kolay bir cerrahi sunacak şekilde tasarlanmıştır.

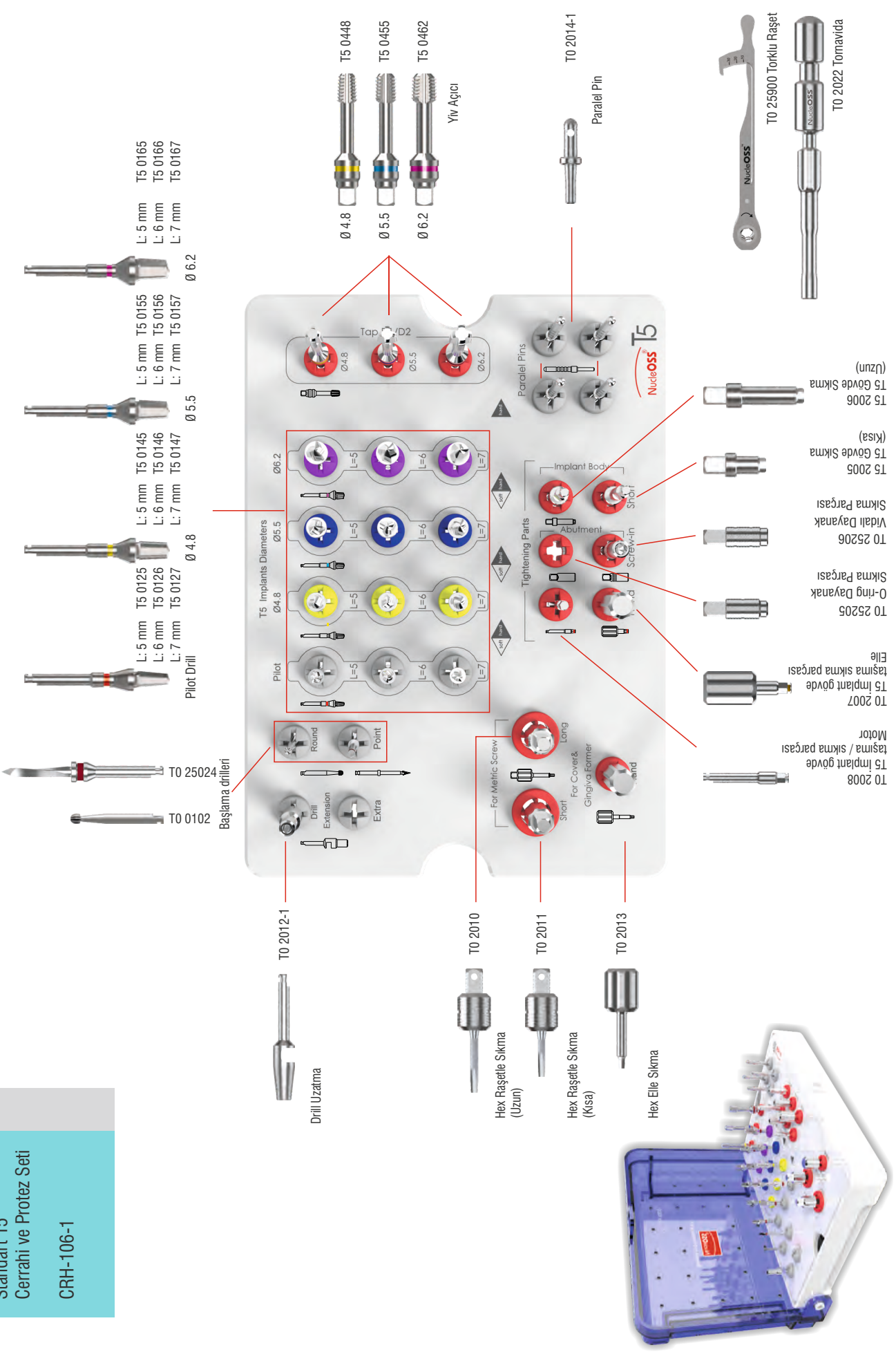

Ø 4.8 L: 6 mm


Ø 4.8 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

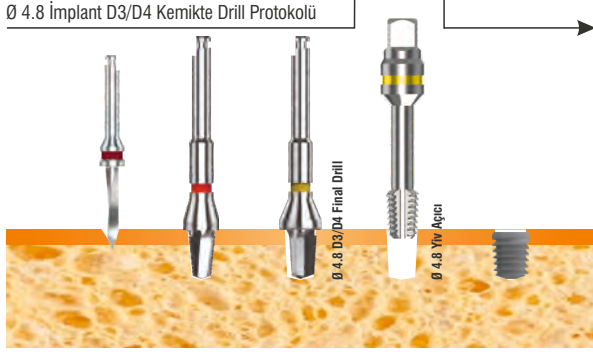

Ø 4.8 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Ø 5.5 L: 6 mm


Ø 5.5 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

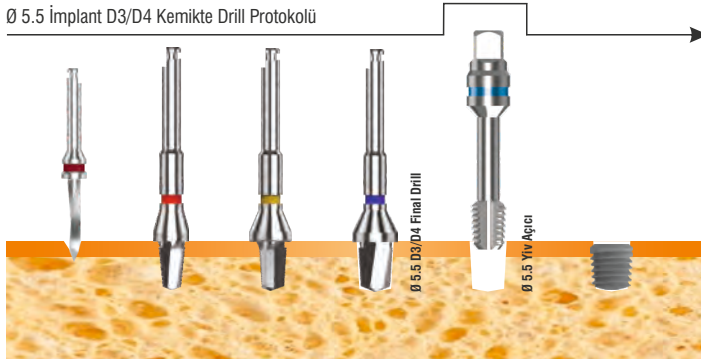

Ø 5.5 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Ø 6.2 L: 6 mm


Ø 6.2 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

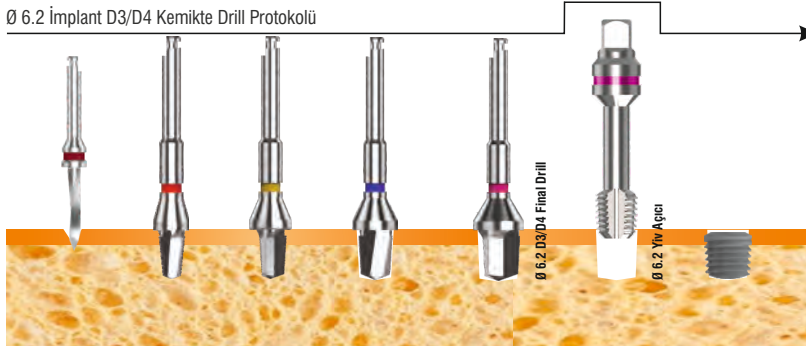

Ø 6.2 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Kusursuz uyum

doğal farkındalık

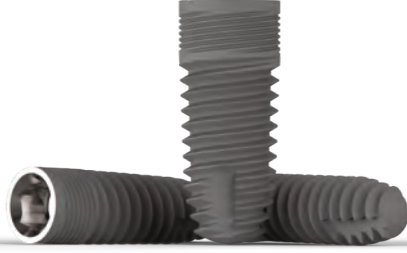

Tpure

Kemik Seviyeli İmplant

Kemik seviyeli
Tpure implant,
dayanıklı ve ekonomik
olmasının yanısıra
estetikliği ile yüzünüzü gülümsetir.

Tabiatın en gizemli
canlılarından olan kelekler,
yaşamlarını sürdürebilmek için
bulundukları ortama
uyum sağlayarak
kamuflej mucizesinin
en kusursuz örneklerini sergiler.



Simante Çözümler

Vidalı Çözümler

Hareketli Protez Çözümleri

Kişiyel Özel Çözümler
(Döküm Yöntemi ile)

Kişiyel Özel Çözümler
(Cad-Cam ile)

İyileşme Başlıkları


Ölçü Parçaları

Analoglar

Geçici Parçalar (PEEK)


NucleOSS™

Hepsi Bir Pakette

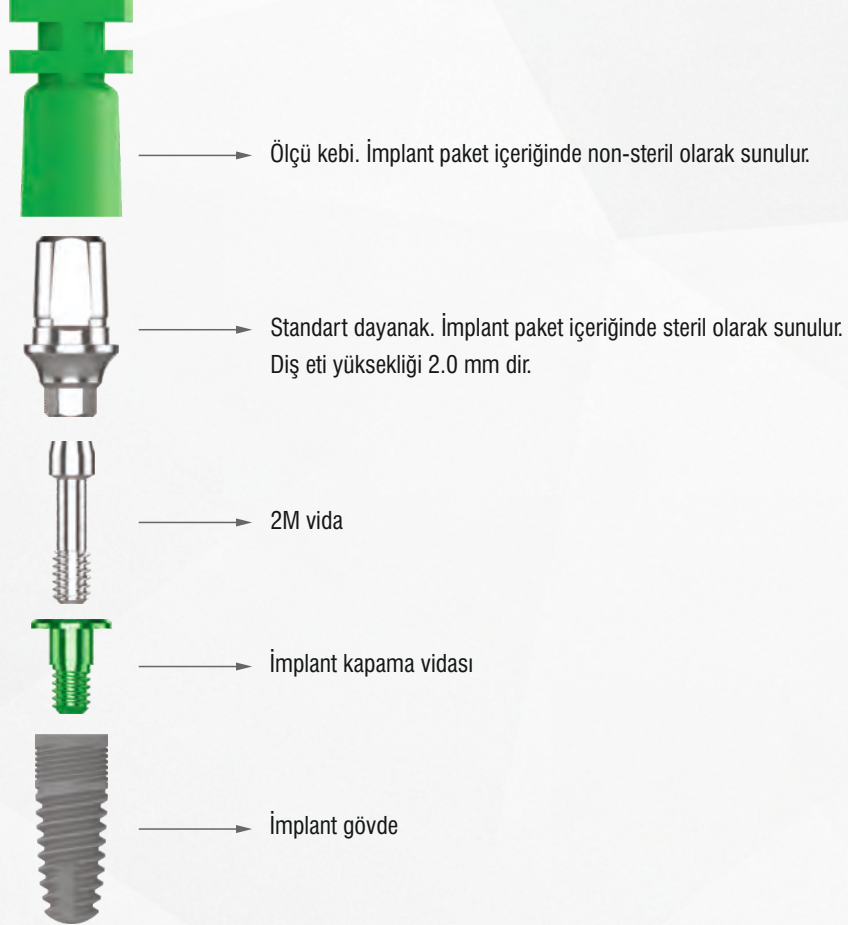


Tpure implant, sadeleştirilmiş akıllı tasarımı sayesinde tüm endikasyonlarınıza estetik, güvenli ve ekonomik çözümler sunar. Steril ambalajında bulunan standart abutment, taşıdığı implant gövdenin çapıyla orantılı olarak üç farklı protetik platform çapına sahiptir. Aynı ambalajdaki ölçü kepleri de bu platform çaplarıyla uyumludur.


aynı konfor,
aynı güven,
daha sade...



Kilitli Steril Tüp Kapağı.
Askı Kapağı
TiGr-5 Titanyum Taşıyıcı
TiGr-5 Taşıyıcı Parça / Abutment
İmplant Gövde
Taşıyıcı Askı
İmplant Kapağı

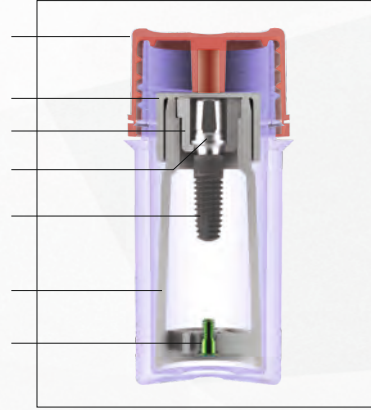

Kilidi kopmuş veya açılmış ürünleri kullanmayınız!

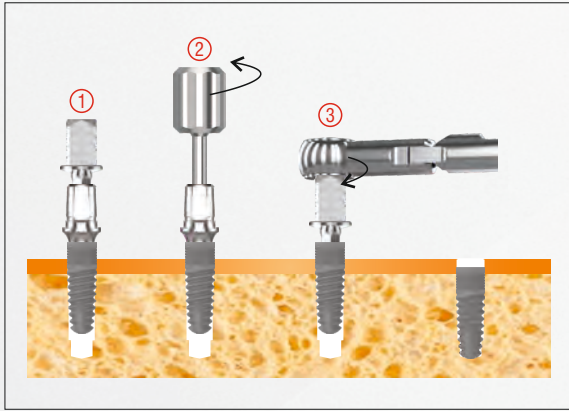

Taşıma ve Sıkma Parçası:


- İmplantı steril tüpten hasta ağızına taşıırken, taşıma ve sıkma parçası implant yuvasına **TAM ve DOĞRU POZİSYONDA** oturmalıdır.
- (1) Taşıma parçası yeterli teması sağlamazsa implant taşınırken düşebilir. İmplant yuvaya mikro yivlere kadar yerleştirildikten sonra üzerindeki dayanak çıkartılır.
- (2) İmplantın yerleştirilme işlemi sıkma parçası ile tamamlanır.
- (3) **Aksi takdirde dayanağın hex'i kırılabilir.**

* Sayfa 55'de gösterilen D1/D2/D3/D4 kemikte drill protokolü mutlaka uygulanmalıdır.

* Lütfen sayfa 55'deki drill protokolüne bakınız.


İmplant Kapağı Taşıma:

İmplant kapağını askıdan alırken; hex anahtarı kapağa tam olarak yerleştirilir ve **aynı eksen**de sağa sola çevirmeden **geri çekilir**.

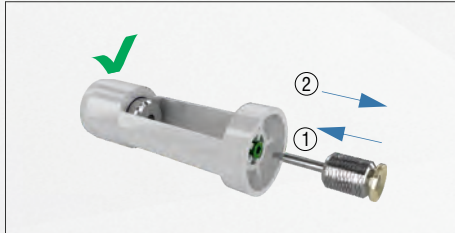

Boyun bölgesindeki kemiğin sağlıklı oluşması için; cerrahi frezin kemikte açtığı yuva, implant boyundan **0,7mm** daha uzundur!

► Cerrahi planlamada bunu dikkate alınız.

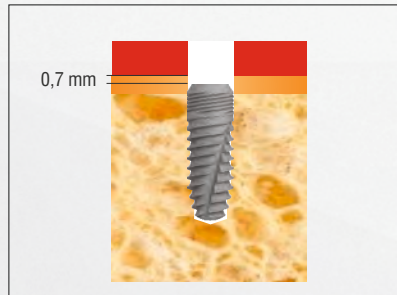

T43615



Ø 3.4

L: 8
L:10 T43410
L:12 T43412
L:14 T43414

T44215



Ø 3.8

L: 8 T43808
L:10 T43810
L:12 T43812
L:14 T43814



Ø 4.2

L: 8 T44208
L:10 T44210
L:12 T44212
L:14 T44214

T45015



Ø 5.0

L: 8 T45008
L:10 T45010
L:12 T45012
L:14 T45014




Dar Platform (4.2 mm)




Standart Platform (5.0 mm)



Geniş Platform (6.0 mm)

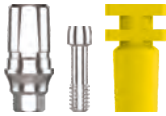

T44061

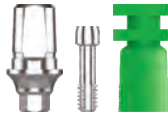

T44861



T46061

İyileşme Başlığı Renk Kodu

Dar Platform (Ø 4.2)	3.4 / 3.8 / 4.2 mm çaplı Tpure implant gövdelerin üstyapıları birbiri ile uyumludur. Dar ve standart protetik platforma sahiptirler.
Standart Platform (Ø 5.0)	
Geniş Platform (Ø 6.0)	5.0 mm çaplı gövdeler için

İyileşme Başlığı - Dayanak Uyumu

İyileşme Başlığı (h)	Abutment Başlığı (h)
2.0 mm	1.0 mm
4.0 mm	2.0/3.0 mm
6.0 mm	4.0/5.0 mm

Kronun protetik platform çapını önceden planlayıp iyileşme başlığını ona göre belirleyiniz. İyileşme başlıkları ve simante abutmentlerin tabloda gösterildiği gibi kullanılması tavsiye edilir. Bu sayede iyileşme başlığının şekillendirdiği anatomiye uygun abutment kullanarak yumuşak doku - abutment uyumunu bozmadan iyi bir "platform switch" etkisi oluşturabilir ve hastanıza konforlu bir protez süreci sağlayabilirsiniz.

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Düz Dayanak

3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		Ti Gr5	4.2	1.0	T44001
				2.0	T44002
				3.0	T44003
				5.0	T44005
3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		Ti Gr5	5.0	1.0	T44801
				2.0	T44802
				3.0	T44803
				5.0	T44805
5.0 çapla uyumludur		Ti Gr5	6.0	1.0	T46001
				2.0	T46002
				3.0	T46003
				5.0	T46005

Geçici Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur.)

HEX		PEEK	5.0		T432022
NO-HEX		PEEK	5.0		T432023

Geçici İyileşme Başlığı (Tüm çaplarla uyumludur.)

	PEEK	6.0		T432034
---	------	-----	--	---------

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Açılı Dayanak (3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur)



10°

Ti Gr5

4.2

1.0	T44011-10
2.0	T44012-10
3.0	T44013-10



20°

1.0	T44011-20
2.0	T44012-20
3.0	T44013-20
4.0	T44014-20



10°

Ti Gr5

5.0

1.0	T44811-10
2.0	T44812-10
3.0	T44813-10



20°

1.0	T44811-20
2.0	T44812-20
3.0	T44813-20
4.0	T44814-20



30°

1.0	T44811-30
2.0	T44812-30
3.0	T44813-30

Açılı Dayanak (5.0 çapla uyumludur)



10°

Ti Gr5

6.0

2.0	T46012-10
-----	-----------



20°

2.0	T46012-20
-----	-----------



30°

2.0	T46012-30
-----	-----------

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

İyileşme Başlıkları



3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		Ti Gr5	4.2	2.0	T44052
				4.0	T44054
				6.0	T44056
3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		Ti Gr5	5.0	2.0	T44852
				4.0	T44854
				6.0	T44856
5.0 çapla uyumludur		Ti Gr5	6.0	2.0	T46052
				4.0	T46054
				6.0	T46056

Ölçü Kepleri (Standart dayanak üstünden)


Standart Dayanak Ölçü Kebi Protetik Platform Çapı 4.3 mm			T0 32909
Standart Dayanak Ölçü Kebi Protetik Platform Çapı 5.0 mm			T0 32910
Standart Dayanak Ölçü Kebi Protetik Platform Çapı 6.0 mm			T0 32911
Ölçü Kebi Tüm kapalı ölçü parçaları için		4'lü pakette (ekstra)	T0 32912

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Ölçü Parçaları ve Analog (3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur)

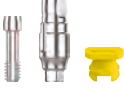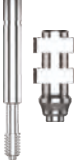Kapalı ölçü parçası		Ti Gr5			T44240-1
Açık ölçü parçası (HEX)		Ti Gr5			T44240
Açık ölçü parçası (NO-HEX)		Ti Gr5			T44241
Analog					T44020

Ölçü Parçaları ve Analog (5.0 çapla uyumludur)

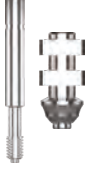Kapalı ölçü parçası					T45540-1
Açık ölçü parçası (HEX)		Ti Gr5			T45540
Açık ölçü parçası (NO-HEX) Açılı yerleştirilmiş gövdeler için		Ti Gr5			T45541
Analog					T44820

Bağlantı Vidaları

Simante dayanaklar ve kapalı ölçü parçaları için		Ti Gr5			T0 2001
Açık ölçü parçası için		Ti Gr5			T0 2001-1

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Multi Unit Dayanak | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex (Tüm çaplarla uyumludur)

	0°	Ti Gr5	5.0	1.5	T45045
				3.0	T45046
				5.0	T45047
	17°	Ti Gr5	5.0	1.5/3.1	T45541-17
				2.4/4.0	T45542-17
	30°	Ti Gr5	5.0	1.25/4.0	T45543-30
				2.0/4.75	T45544-30

Konfor Kep T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32905
Cad-Cam Tarama Parçası		PEEK			T0 32033
Multi Unit Ti-Base Dayanak		Ti Gr5			T0 32808
Titanyum Kep (No-Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32908
Burn out kep (No-Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		PVC			T0 32901
Ölçü Parçası (kapalı / No-Hex) T0 16003 vidası ve T0 32912 kebi ile birlikte		Ti Gr5			T0 32607
Ölçü Parçası (açık / No-Hex) T0 16004 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32608
Multi Unit Analog (No-Hex)		Paslanmaz çelik			T0 32202
Ölçü Parçası (Kapalı Kaşık) kebi		PVC			T0 32912
İmplant - Multi Unit bağlantı vidası		Ti Gr5			T42004
Multi Unit Dayanak için okluzal vida		Ti Gr5			T0 16003
Ölçü Parçası (Açık Kaşık) için vida		Ti Gr5			T0 16004

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Multi Unit Dayanak | Tek Diş Uygulamaları | Hex (Tüm çaplarla uyumludur)

	0°	Ti Gr5	5.0	1.5	T45048
				3.0	T45049
				5.0	T45050
Konfor Kep T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32905
Titanyum Kep (Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32904
Burn out kep (Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		PVC			T0 32902
Ölçü Parçası (kapalı / Hex) T0 16003 vidası ve T0 32912 kebi ile birlikte		Ti Gr5			T0 32609
Ölçü Parçası (açık / Hex) T0 16004 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32610
Multi Unit Analog (Hex)		Paslanmaz çelik			T0 32203
Ölçü Parçası (Kapalı Kaşık) kebi		PVC			T0 32912
İmplant - Multi Unit bağlantı vidası		Ti Gr5			T42004
Multi Unit Dayanak için okluzal vida		Ti Gr5			T0 16003
Ölçü Parçası (Açık Kaşık) için vida		Ti Gr5			T0 16004

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Universal Ti-Base Döküm Dayanak | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex

3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		Ti Gr5	4.0		T44080
5.0 çapla uyumludur		Ti Gr5	4.5		T44580

Universal Ti-Base Döküm Dayanak | Tek Diş Uygulamaları | Hex

3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		Ti Gr5	4.0		T44081
5.0 çapla uyumludur		Ti Gr5	4.5		T44581
		Ti Gr5			T432907
		PVC			T0 32907
		Ti Gr5			T416001

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Diğer Yardımcı Parçalar (3.4 / 3.8 / 4.2 çaplar için)

Kapalı ölçü parçası		Ti Gr5			T44240-1
Açık ölçü parçası (HEX)		Ti Gr5			T44240
Açık ölçü parçası (NO-HEX) Açılı yerleştirilmiş gövdeler için		Ti Gr5			T44241
Analog		Paslanmaz çelik			T44020

Diğer Yardımcı Parçalar (5.0 çap için)

Kapalı ölçü parçası		Ti Gr5			T45540-1
Açık ölçü parçası (HEX)		Ti Gr5			T45540
Açık ölçü parçası (NO-HEX) Açılı yerleştirilmiş gövdeler için		Ti Gr5			T45541
Analog		Paslanmaz çelik			T44820

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----



Cad-Cam NucleOSS Ti-Base Dayanak | Tek Diş Uygulamaları | Hex

3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		Ti Gr5	4.5		T432804
5.0 çapla uyumludur		Ti Gr5	5.5		T432806

Cad-Cam NucleOSS Ti-Base Dayanak | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex

3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		Ti Gr5	4.5		T432805
5.0 çapla uyumludur		Ti Gr5	5.5		T432807

Tarama Gövdesi | İmplant-Analog Üstünden | PEEK

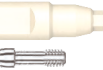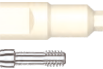3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		PEEK			T432897
5.0 çapla uyumludur		PEEK			T432898

Cad-Cam Cerec® Ti-Base Dayanak

3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		Ti Gr5	4.5		T432802
5.0 çapla uyumludur		Ti Gr5	5.5		T432803
Tarama postu (4'lü paket)					T0 32949
		Ti Gr5			T0 2001

Cerec® Sirona'nın tescilli markasıdır.

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Topuz Dayanak Metal Yuva ve keb birlikte		Ti Gr5	4.5	1.5	T44531
				3.0	T44532
				5.0	T44533
Ölçü Parçası		Ti Gr5			T0 32615
Analog		Paslanmaz çelik			T0 4521
Kapalı metal yuva ve plastiği					T0 5207
Kapalı metal yuva plastiği (sarı-orta sert)	 net: 500 gr	4'lü pakette			T0 4500-16
Kapalı metal yuva plastiği (turuncu-yumuşak)	 net: 350 gr	4'lü pakette			T0 4500-7
Metal yüzük ve silikon halkayla birlikte					T0 5200
Metal yüzük silikon halkası (siyah-orta sert)		4'lü pakette			T0 4500-3
Metal kadeh ve plastikle birlikte					T0 5201
Metal Kadeh Plastiği		4'lü pakette			T0 4500-4
Topuz Abutment Ölçü Parçası Silikonu		4'lü pakette			T0 4500-18



Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Equator® Dayanak Metal Yuva ve kepleriyle birlikte		Ti Gr5	4.5	1.5 3.0 5.0	T44570 T44571 T44572
Ölçü Parçası		Ti Gr5			044CAIN
Analog		Paslanmaz çelik			144AE
Equator® metal yuva		4'lü pakette			CA008
Şeffaf / Ekstra Sert	 1.8 kg	4'lü pakette			CN051
Pembe / Standart Sert	 1.2 kg	4'lü pakette			CN052
Sarı / Yumuşak	 0.6 kg	4'lü pakette			CN053
Siyah / Laboratuvar için Kep	 4'lü pakette				CN068
Kare sıkma anahtarı (Raşet)					774CHE
Motor sıkma					760CE
Kep takma anahtarı					124ICP-N
Metal yuvadan kep çıkarma aparatı					191ECS

Equator® Abutment Rhein 83 'ün tescilli markasıdır.



Tpure / T3 / T2 / T1 Cerrahi ve Protez Seti

CRH-105-1

GÜVENLİ CERRAHİ


Standart Tpure | T3 cerrahi ve protez seti, güvenli ve kolay bir cerrahi sunacak şekilde tasarlanmıştır.

✓ Her çap ve boyda stoperli drill

✓ Renk kodlaması

✓ Her çapa uygun boyun genişletici

✓ Yiv açıcı

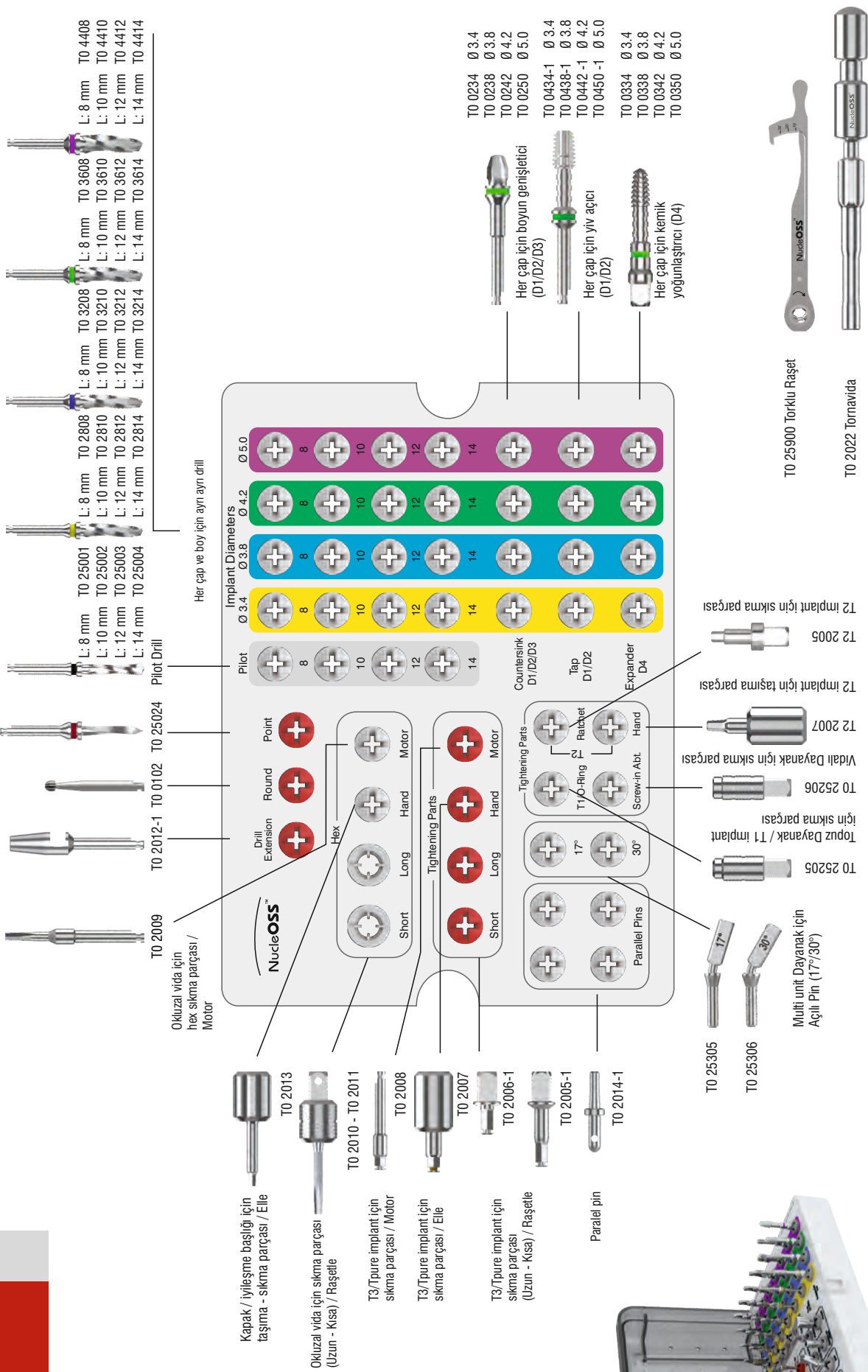


NucleOSS Tpure

DRILL PROTOKOLÜ

Ø 3.4 L: 12 mm


Ø 3.4 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

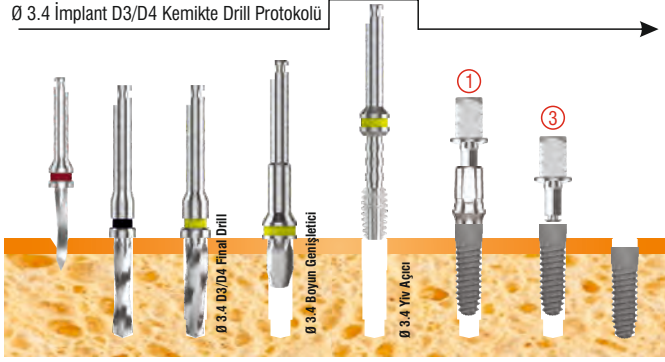

Ø 3.4 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Ø 3.8 L: 12 mm


Ø 3.8 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

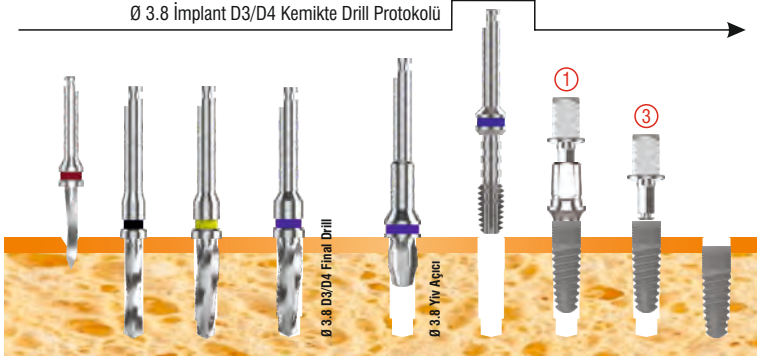

Ø 3.8 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Ø 4.2 L: 12 mm


Ø 4.2 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

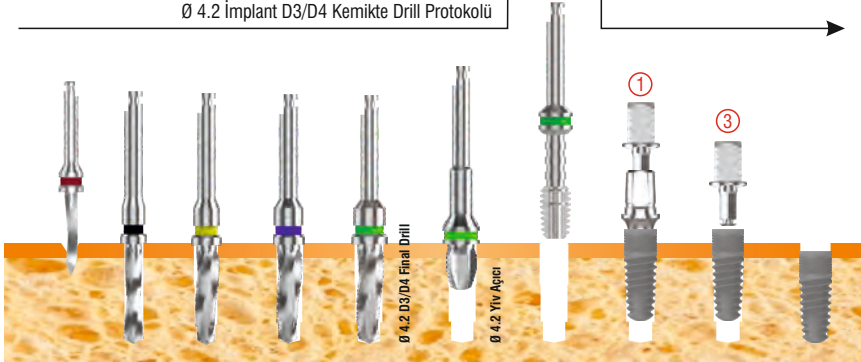

Ø 4.2 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Ø 5.0 L: 12 mm

Ø 5.0 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

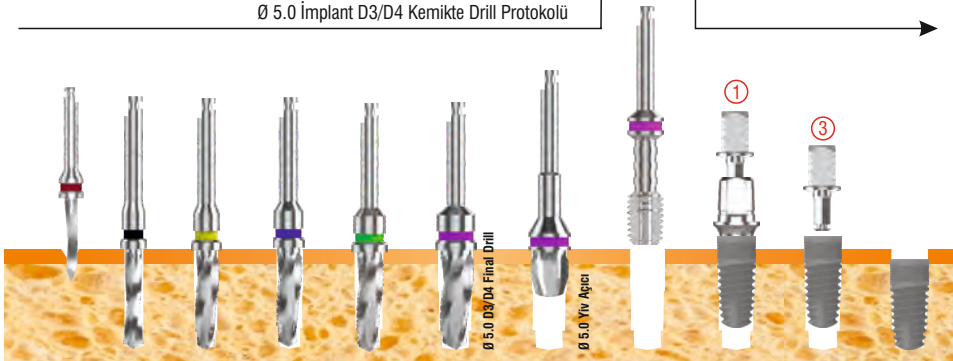

Ø 5.0 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

► İmplantı steril tüpten hasta ağızına taşıırken, taşıma ve sıkma parçası implant yuvasına **TAM ve DOĞRU POZİSYONDA** oturmalıdır.

► (1) Taşıma parçası yeterli teması sağlamazsa implant taşınırken düşebilir. İmplant yuvaya mikro yivlere kadar yerleştirildikten sonra üzerindeki dayanak çıkartılır.

► (2) İmplantın yerleştirilme işlemi sıkma parçası ile tamamlanır.

► (3) Aksî takdirde dayanağın hex'i kırılabilir.

*D1/D2/D3/D4 kemikte drill protokolü mutlaka uygulanmalıdır.

Pratik Uygulama

kalıcı çözüm



T3

Diş Eti Seviyeli İmplant

Diş eti seviyeli T3 implant,
pratik uygulama ile birlikte
güvenli ve ekonomik çözümler sunar.

Sabırla toprağa köklenen Bambu ağaçları,
birçok alanda kullanılabilen bitkilerdir.
120 yıla kadar uzanabilen
yaşamlarının yanı sıra
diğer ağaç türlerinden
daha sağlam ve dayanıklıdır.



Simante Çözümler

Vıdalı Çözümler

Hareketli Protez Çözümleri

Kişiyi Özel Çözümler
(Döküm Yöntemi ile)

Kişiyi Özel Çözümler
(Cad-Cam ile)

İyileşme Başlıkları


Ölçü Parçaları

Analoglar

Geçici Parçalar (PEEK)



NucleOSS™

Hepsi Bir Pakette

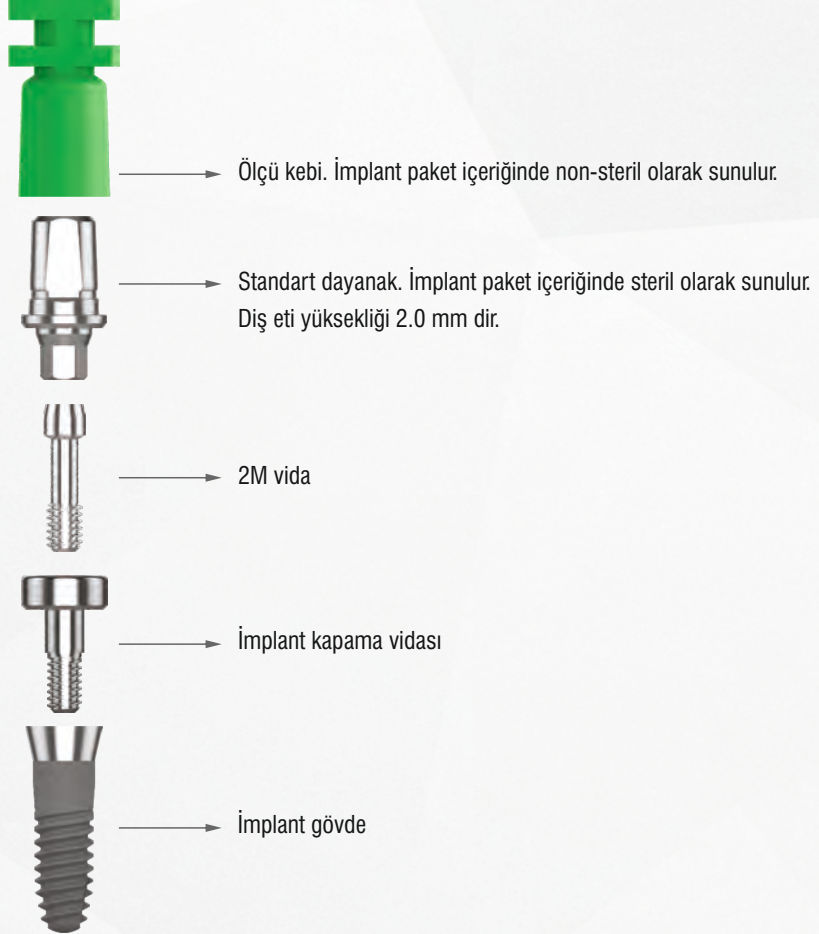


T3 Diş eti seviyeli implant, standart abutment ve ölçü kebi ile birlikte aynı ambalajda sunulur. Pratik uygulama imkanının yanında geniş üst yapı yelpazesi ile güvenli ve ekonomik çözümler sunar.

Kilitli Steril Tüp Kapağı.
Askı Kapağı
TiGr-5 Titanyum Taşıyıcı
TiGr-5 Taşıyıcı Parça / Abutment
İmplant Gövde
Taşıyıcı Askı
İmplant Kapağı

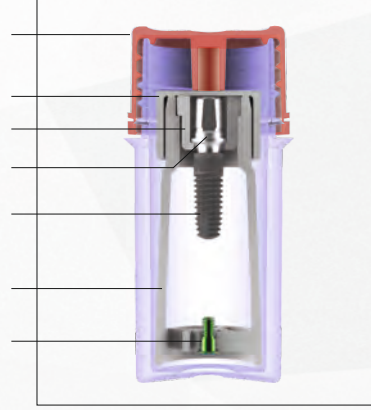

Kilidi kopmuş veya açılmış ürünleri kullanmayınız!

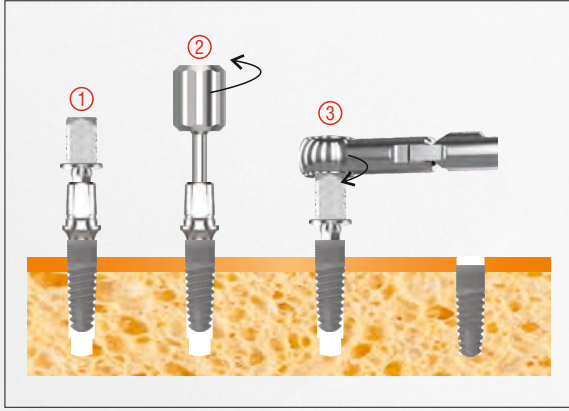

Taşıma ve Sıkma Parçası:



- İmplantı steril tüpten hasta ağızına taşıırken, taşıma ve sıkma parçası implant yuvasına **TAM ve DOĞRU POZİSYONDA** oturmalıdır.
- (1) Taşıma parçası yeterli teması sağlamazsa implant taşınırken düşebilir. İmplant yuvaya mikro yivlere kadar yerleştirildikten sonra üzerindeki dayanak çıkartılır.
- (2) İmplantın yerleştirilme işlemi sıkma parçası ile tamamlanır.
- (3) **Aksi takdirde dayanağın hex'i kırılabilir.**

* Sayfa 71'de gösterilen D1/D2/D3/D4 kemikte drill protokolü mutlaka uygulanmalıdır.

* Lütfen sayfa 71'deki drill protokolüne bakınız.


İmplant Kapağı Taşıma:

İmplant kapağını askıdan alırken; hex anahtarı kapağa tam olarak yerleştirilir ve **aynı eksen**de sağa sola çevirmeden **geri çekilir**.

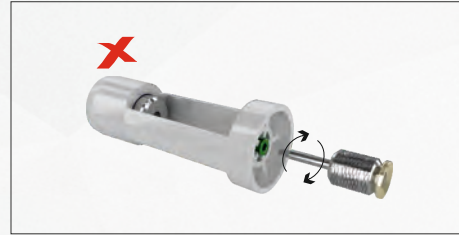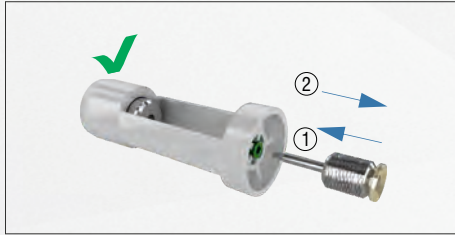

Boyun bölgesindeki kemiğin sağlıklı oluşması için; cerrahi frezin kemikte açtığı yuva, implant boyundan **0,7mm** daha uzundur!


► Cerrahi planlamada bunu dikkate alınız.

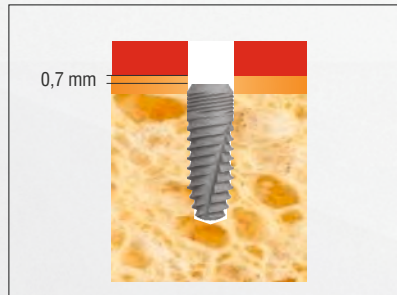

T3 CERRAHİ

DİŞ ETİ SEVİYELİ İMPLANT

GÖVDELER


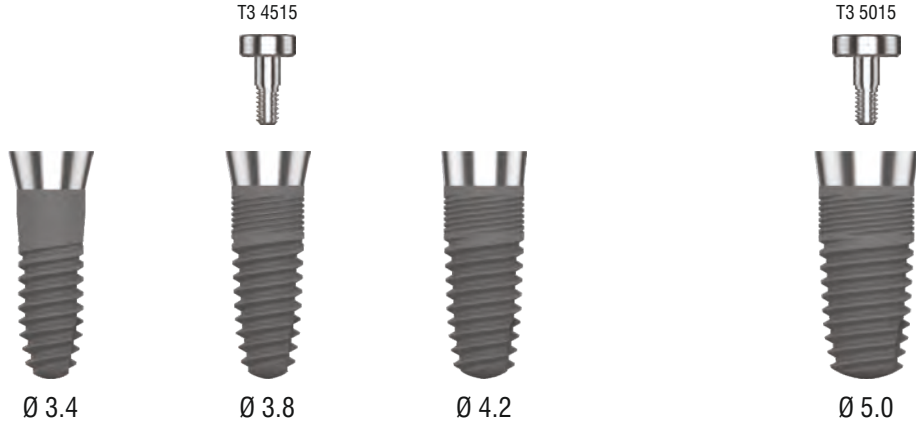


L: 8
L:10 T3 3410
L:12 T3 3412
L:14 T3 3414


L: 8 T3 3808
L:10 T3 3810
L:12 T3 3812
L:14 T3 3814

L: 8 T3 4208
L:10 T3 4210
L:12 T3 4212
L:14 T3 4214


L: 8 T3 5008
L:10 T3 5010
L:12 T3 5012
L:14 T3 5014

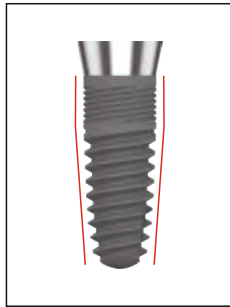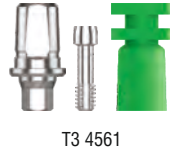

- Silindirik boyun bölgesi
- Apikale doğru konik dizayn

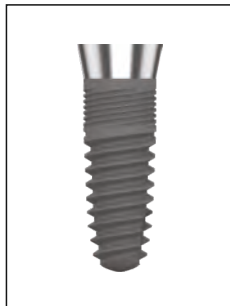


- H: 2.0 mm parlak boyun bölgeleri
- 3.0 mm yüksekliğinde mikro yiv

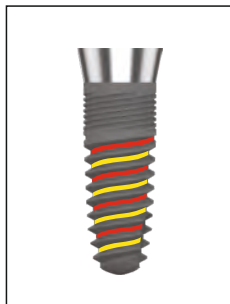

- Yuvaya yerleştirmeyi kolaylaştıran
- Çift sarmal yiv tasarımı

Yeşil: Standart platform
Ø 5.0 mm (SD)

Mor : Geniş platform
Ø 6.0 mm (WD)

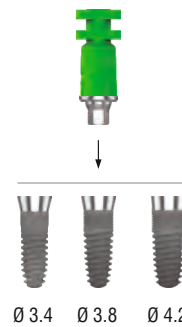

T3 PROTEZ

SİMANTE ÇÖZÜMLER

DÜZ DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Düz Dayanak

Tüm çaplarda kullanılır.		Ti Gr5		0	T3 4500
3.4 / 3.8 / 4.2 Çaplarla uyumludur.		Ti Gr5	5.0	1.0 2.0	T3 4501 T3 4502
5.0 Çapla uyumludur.		Ti Gr5	6.0	1.0 2.0	T3 5001 T3 5002

Geçici Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)

HEX		PEEK	5.0		T3 32022
NO-HEX		PEEK	5.0		T3 32023

Geçici İyileşme Başlığı (Tüm çaplarla uyumludur)

		PEEK	6.0		T3 32034
--	---	------	-----	--	----------

T3 PROTEZ

SİMANTE ÇÖZÜMLER

AÇILI DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Açılı Dayanak

Tüm çaplarla uyumludur		10°			0	T3 4510-10
Tüm çaplarla uyumludur		20°	Ti Gr5		0	T3 4510-20
Tüm çaplarla uyumludur		30°			0	T3 4510-30
3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		20°	Ti Gr5	5.0	1.0	T3 4511-20
		20°			2.0	T3 4512-20
5.0 çapla uyumludur		20°	Ti Gr5	6.0	1.0	T3 5011-20
		20°			2.0	T3 5012-20

Ölçü Kepleri (Standart dayanak üstünden)

Standart Dayanak Ölçü Kebi Protetik Platform Çapı 5.0 mm					T0 32910
Standart Dayanak Ölçü Kebi Protetik Platform Çapı 6.0 mm					T0 32911
Ölçü Kebi Tüm kapalı ölçü parçaları için		4'lü pakette (ekstra)			T0 32912

T3 PROTEZ

SİMANTE ÇÖZÜMLER

DİĞER PARÇALAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

İyileşme Başlıkları

3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur		Ti Gr5	5.0	1.0	T3 4516
				4.0	T3 4517
5.0 çapla uyumludur		Ti Gr5	6.0	1.0	T3 5016
				4.0	T3 5017

Ölçü Parçaları (Tüm çaplara uyumludur)

Kapalı ölçü parçası		Ti Gr5			T3 4940-1
Açık ölçü parçası (HEX)					T3 4940
Açık ölçü parçası (NO-HEX) Açılı yerleştirilmiş gövdeler için					T3 4941

Analoglar

3.4 / 3.8 / 4.2 çaplarla uyumludur					T3 4520
5.0 çapla uyumludur					T3 5020
Simante dayanaklar ve kapalı ölçü parçaları için		Ti Gr5			T0 2001
Açık ölçü parçası için		Ti Gr5			T0 2001-1

T3 PROTEZ

VİDALI ÇÖZÜMLER MULTİ ÜNİT ve VİDALI DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Multi Unit Dayanak Çoklu Diş Uygulamaları No-Hex					
	0°	Ti Gr5	5.0	1.5	T3 5041
				3.0	T3 5042
				1.25/2.9	T3 5541-17
				2.0/3.6	T3 5542-17
				1.25/3.8	T3 5543-30
Konfor Kep T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32905
Cad-Cam Tarama Parçası		PEEK			T0 32033
Multi Unit TiBase Dayanak		Ti Gr5			T0 32808
Titanyum Kep (No-Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32908
Burn out kep (No-Hex) T0 16003 vidasıyla birlikte		PVC			T0 32901
Ölçü Parçası (kapalı / No-Hex) T0 16003 vidası ve T0 32912 kebi ile birlikte		Ti Gr5			T0 32607
Ölçü Parçası (açık / No-Hex) T0 16004 vidasıyla birlikte		Ti Gr5			T0 32608
Multi Unit Analog (No-Hex)		Paslanmaz çelik			T0 32202
Ölçü Parçası (Kapalı Kaşık) kebi		PVC			T0 32912
İmplant - Multi Unit bağlantı vidası		Ti Gr5			T3 2004
Multi Unit Dayanak için okluzal vida		Ti Gr5			T0 16003
Ölçü Parçası (Açık Kaşık) için vida		Ti Gr5			T0 16004

T3 PROTEZ

VİDALI ÇÖZÜMLER MULTİ UNİT ve VİDALI DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Multi Unit Dayanak | Tek Diş Uygulamaları | Hex



0°

5.0

1.5	T3 5044
3.0	T3 5045

Konfor Kep
T0 16003 vidasıyla birlikte



Ti Gr5

T0 32905

Titanyum Kep (Hex)
T0 16003 vidasıyla birlikte



Ti Gr5

T0 32904

Burn out kep (Hex)
T0 16003 vidasıyla birlikte



PVC

T0 32902

Ölçü Parçası (kapalı / Hex)
T0 16003 vidası ve T0 32912 kebi ile birlikte



Ti Gr5

T0 32609

Ölçü Parçası (açık / Hex)
T0 16004 vidasıyla birlikte



Ti Gr5

T0 32610

Multi Unit Analog (Hex)



Paslanmaz çelik

T0 32203

Ölçü Parçası
(Kapalı Kaşık) kebi



PVC

T0 32912

İmplant - Multi Unit
bağlantı vidası



Ti Gr5

T3 2004

Multi Unit Dayanak için
okluzal vida



Ti Gr5

T0 16003

Ölçü Parçası
(Açık Kaşık) için vida



Ti Gr5

T0 16004

T3 PROTEZ

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER
UNİVERSAL DÖKÜM DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Universal Ti-Base Döküm Dayanak | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

5.0

T3 5080

Universal Ti-Base Döküm Dayanak | Tek Diş Uygulamaları | Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

5.0

T3 5081

Döküm Kebi, T416001
vidayla birlikte



Ti Gr5

T3 32907



PVC

T0 32907



Ti Gr5

T3 16001

Ölçü Parçaları (Tüm çaplarla uyumludur)

Kapalı ölçü
parçası



Ti Gr5

T3 4940-1

Açık ölçü
parçası (HEX)



Ti Gr5

T3 4940

Açık ölçü
parçası (NO-HEX)
Açılı yerleştirilmiş gövdeler için



Ti Gr5

T3 4941

Analoglar

3.4 / 3.8 / 4.2
çaplarla uyumludur



T3 4520

5.0 çapla uyumludur



T3 5020

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Cad-Cam NucleOSS Ti-Base Dayanak | Tek Diş Uygulamaları | Hex (Tüm çaplarla uyumludur)



Ti Gr5

5.0

T3 32806

Cad-Cam NucleOSS Ti-Base Dayanak | Çoklu Diş Uygulamaları | No-Hex (Tüm çaplarla uyumludur)




Ti Gr5

5.0

T3 32807

Tarama Gövdesi | İmplant-Analog Üstünden | PEEK (Tüm çaplarla uyumludur)

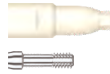

PEEK

T3 32897

Cad-Cam Cerec® Ti-Base Dayanak

Tüm çaplara uyumludur



Ti Gr5

5.0

T3 32803

Tarama postu (4'lü paket)



T0 32949



Ti Gr5

T0 2001

Cerec® Sirona'nın tescilli markasıdır.

T3 PROTEZ

HAREKETLİ PROTEZ ÇÖZÜMLERİ

TOPUZ DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
----------	---------------	----------	--------------------------	---------------------------	-----

Topuz Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)

Topuz Dayanak Metal Yuva ve keb birlikte		Ti Gr5	5.0	1.5	T3 5030
				3.0	T3 5031

Ölçü Parçası		Ti Gr5			T0 32615
Analog		Paslanmaz çelik			T0 4521

Kapalı metal yuva ve plastiği					T0 5207
Kapalı metal yuva plastiği (sarı-orta sert)	 net: 500 gr	4'lü pakette			T0 4500-16
Kapalı metal yuva plastiği (turuncu-yumuşak)	 net: 350 gr	4'lü pakette			T0 4500-7
Metal yüzük ve silikon halkayla birlikte					T0 5200
Metal yüzük silikon halkası (siyah-orta sert)		4'lü pakette			T0 4500-3
Metal kadeh ve plastikte birlikte					T0 5201
Metal Kadeh Plastiği		4'lü pakette			T0 4500-4
Topuz Abutment Ölçü Parçası Silikonu		4'lü pakette			T0 4500-18

T3 PROTEZ

HAREKETLİ PROTEZ ÇÖZÜMLERİ EQUATOR® DAYANAKLAR

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Equator® Dayanak (Tüm çaplarla uyumludur)					
Equator® Dayanak Metal Yuva ve kepleriyle birlikte		Ti Gr5	5.0	1.5	T3 5070
				3.0	T3 5071
Ölçü Parçası		Ti Gr5			044CAIN
Analog		Paslanmaz çelik			144AE
Equator® metal yuva		4'lü pakette			CA008
Şeffaf / Ekstra Sert		1.8 kg 4'lü pakette			CN051
Pembe / Standart Sert		1.2 kg 4'lü pakette			CN052
Sarı / Yumuşak		0.6 kg 4'lü pakette			CN053
Siyah / Laboratuvar için Kep		4'lü pakette			CN068
Kare sıkma anahtarı (Raşet)					774CHE
Motor sıkma					760CE
Kep takma anahtarı					124ICP-N
Kep çıkarma aparatı					191ECS

Equator® Abutment Rhein 83 'ün tescilli markasıdır.


Tpure / T3 / T2 / T1 Cerrahi ve Protez Seti

CRH-105-1

GÜVENLİ CERRAHİ

Standart Tpure | T3 cerrahi ve protez seti, güvenli ve kolay bir cerrahi sunacak şekilde tasarlanmıştır.

- ✓ Her çap ve boyda stoperli drill
- ✓ Renk kodlaması
- ✓ Her çapa uygun boyun genişletici
- ✓ Yiv açıcı

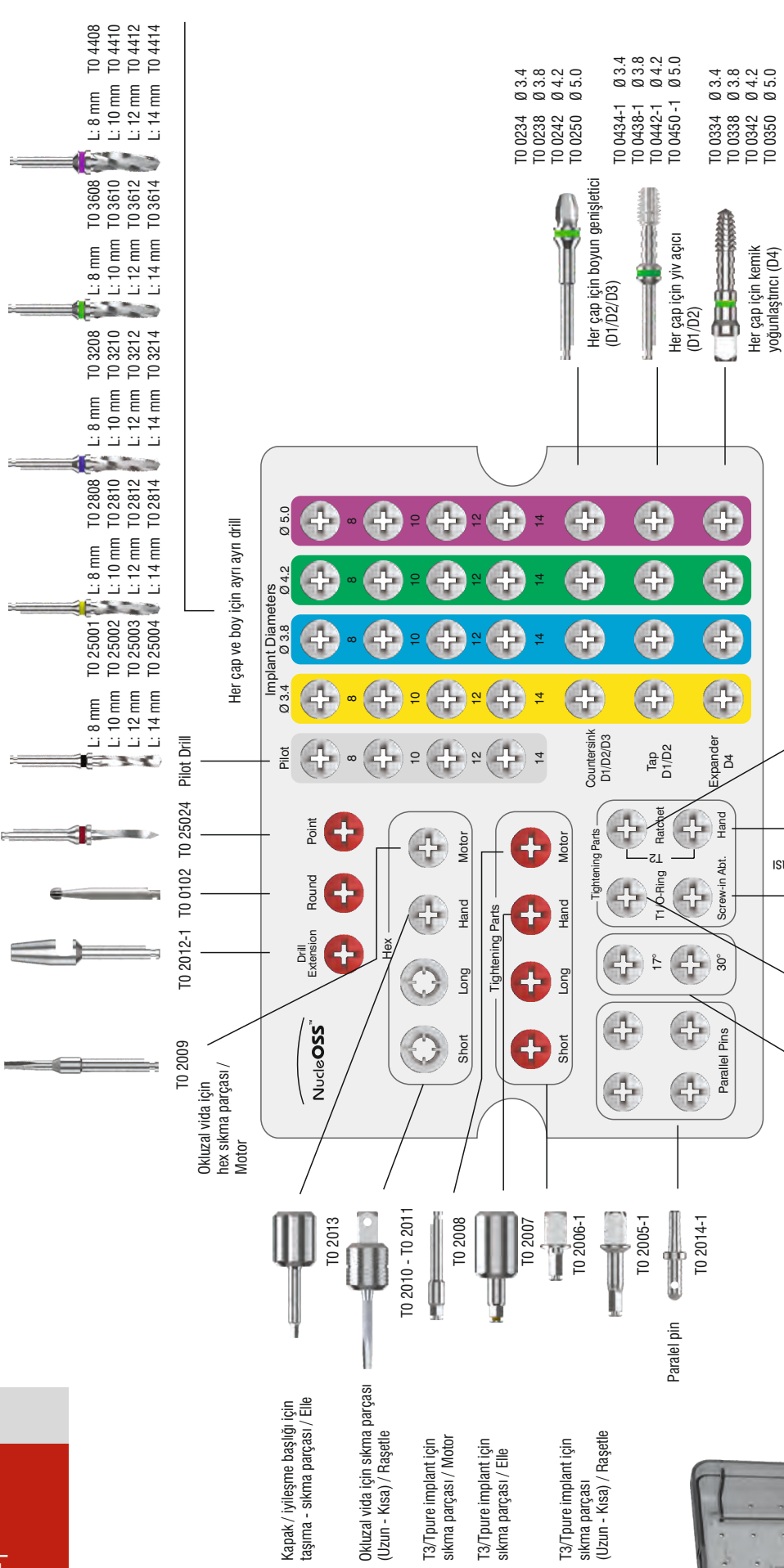

TO 25900 Torku Raşet

TO 2022 Tomavida


Multi unit Dayanak için
Açılı Pin (17°/30°)

NucleOSS T3


DRILL PROTOKOLÜ

Ø 3.4 L: 12 mm

Ø 3.4 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

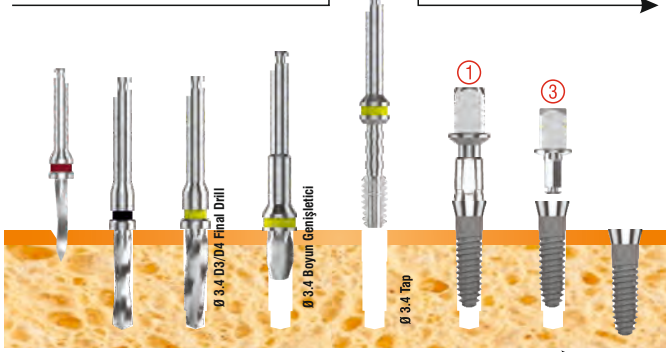

Ø 3.4 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

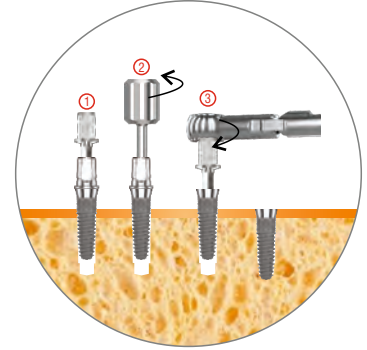

► İmplantı steril tüpten hasta ağızına taşıırken, taşıma ve sıkma parçası implant yuvasına **TAM ve DOĞRU POZİSYONDA** oturmalıdır.

► (1) Taşıma parçası yeterli teması sağlamazsa implant taşınırken düşebilir. İmplant yuvaya mikro yivlere kadar yerleştirildikten sonra üzerindeki dayanak çıkartılır.


► (2) İmplantın yerleştirilme işlemi sıkma parçası ile tamamlanır.

► (3) Aksi takdirde dayanağın hex'i kırılabilir.

*D1/D2/D3/D4 kemikte drill protokolü mutlaka uygulanmalıdır.

Ø 3.8 L: 12 mm


Ø 3.8 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

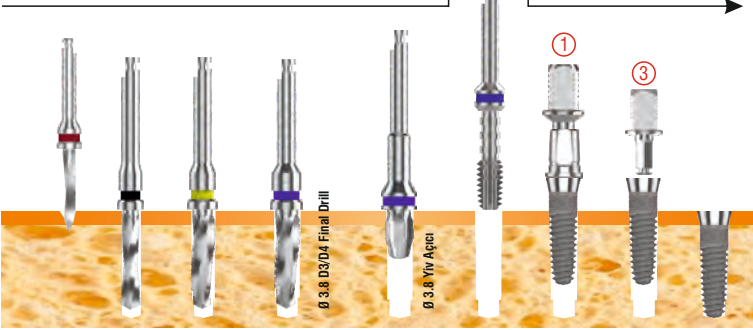

Ø 3.8 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Ø 4.2 L: 12 mm


Ø 4.2 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

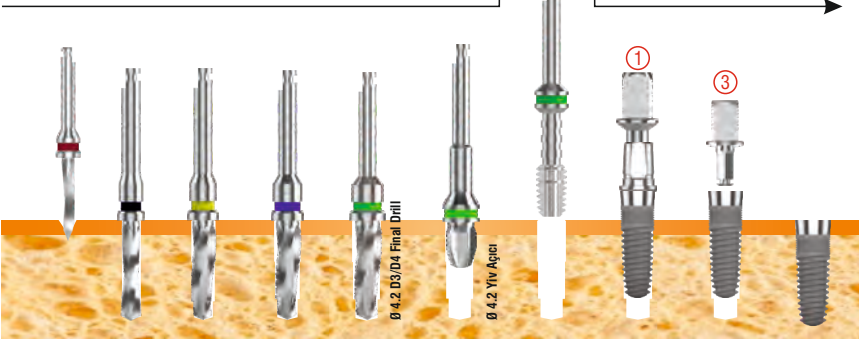

Ø 4.2 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

Ø 5.0 L: 12 mm


Ø 5.0 İmplant D3/D4 Kemikte Drill Protokolü

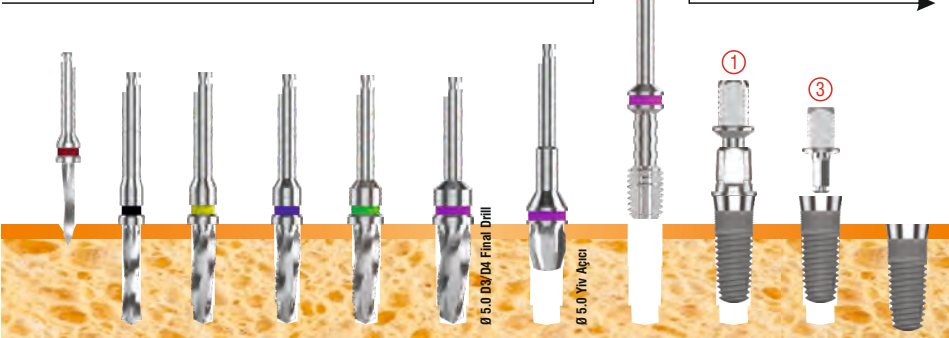


Ø 5.0 İmplant D1/D2 Kemikte Drill Protokolü

T2 MONO İMPLANT

CERRAHİ VE PROTEZ

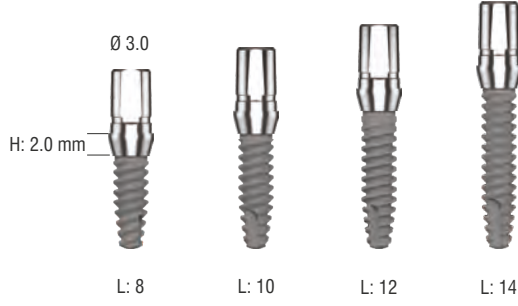

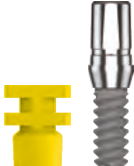Ø 3.0 T2 Mono Implant		Paket İçeriği	
Kod	Materyal		
T2 3008	Ti Gr4		
T2 3010			
T2 3012			
T2 3014			

Açıklama	Paket içeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Analog		Paslanmaz çelik			T2 3920


T1 / T2 Cerrahi ve Protez Seti



Ürün No	Açıklama	Materyal	Ürün
T0 25024	Punto Drill	Titanyum	
T0 0102	Round Drill	Titanyum	
T0 2214	Pilot Drill	Titanyum	
T0 25205	O-ring Sıkma	Paslanmaz Çelik	
T2 2005	T2 Gövde Raşet Sıkma	Paslanmaz Çelik	
T2 2007	T2 Gövde Elle Sıkma	Paslanmaz Çelik	
T0 2014-1	Paralel Pin	Paslanmaz Çelik	
T0 25900	Torklu Raşet	Paslanmaz Çelik	

T1 MONO İMPLANT

CERRAHİ VE PROTEZ

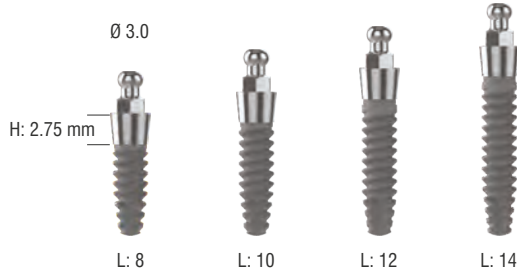

Ø 3.0 T1 Mono Implant		Paket İçeriği	
Kod	Materyal		
T1 3008	Ti Gr4		
T1 3010			
T1 3012			
T1 3014			

Açıklama	Paket İçeriği	Materyal	Protetik Platform Ø (mm)	Diş Eti Yüksekliği H (mm)	Kod
Ölçü Parçası		Ti Gr5			T0 32615
Analog		Paslanmaz çelik			T0 4521
Kapalı metal yuva ve plastiği					T0 5207
Kapalı metal yuva plastiği (sarı-orta sert)	net: 500 gr	4'lü pakette			T0 4500-16
Kapalı metal yuva plastiği (turuncu-yumuşak)	net: 350 gr	4'lü pakette			T0 4500-7
Metal yüzük ve silikon halkayla birlikte					T0 5200
Metal yüzük silikon halkası (siyah-orta sert)		4'lü pakette			T0 4500-3
Metal kadeh ve plastikte birlikte					T0 5201
Metal Kadeh Plastiği		4'lü pakette			T0 4500-4
Topuz Abutment Ölçü Parçası Silikonu		4'lü pakette			T0 4500-18

T1 / T3 / Tpure / T5 / T6 PROTEZ SETİ



Ürün No	Açıklama	Materyal	Ürün
T0 25205	Vidalı Abutment Sıkma	Paslanmaz Çelik	
T0 25206	O-ring Sıkma	Paslanmaz Çelik	
T0 2010	Hex (Uzun)	Paslanmaz Çelik	
T0 2011	Hex (Kısa)	Paslanmaz Çelik	
T0 2009	Hex (Motor)	Paslanmaz Çelik	
T0 25900	Torklu Raşet	Paslanmaz Çelik	



Ürün No

Açıklama

CRH-109

T6 Cerrahi ve Protez Seti



Ürün No

Açıklama

CRH-105-1

T1 / T2 / T3 / Tpure Cerrahi ve Protez Seti



Ürün No

Açıklama

CRH-106-1

T5 Cerrahi ve Protez Seti



CRH-107
T1 - T2 Cerrahi ve Protez Seti



CRH-108
T1 / T3 / Tpure / T5 / T6 Protez Seti




T6 ÜRÜN LİSTESİ

Kod	Açıklama
T6 3508	T6 İMPLANT GÖVDE 3,5x08 mm
T6 3510	T6 İMPLANT GÖVDE 3,5x10 mm
T6 3512	T6 İMPLANT GÖVDE 3,5x12 mm
T6 3514	T6 İMPLANT GÖVDE 3,5x14 mm
T6 4108	T6 İMPLANT GÖVDE 4,1x08 mm
T6 4110	T6 İMPLANT GÖVDE 4,1x10 mm
T6 4112	T6 İMPLANT GÖVDE 4,1x12 mm
T6 4114	T6 İMPLANT GÖVDE 4,1x14 mm
T6 4808	T6 İMPLANT GÖVDE 4,8x08 mm
T6 4810	T6 İMPLANT GÖVDE 4,8x10 mm
T6 4812	T6 İMPLANT GÖVDE 4,8x12 mm
T6 4814	T6 İMPLANT GÖVDE 4,8x14 mm
T6 NR040	T6 STANDART DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,0 mm
T6 NR041	T6 STANDART DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0 mm
T6 NR042	T6 STANDART DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0 mm
T6 NR043	T6 STANDART DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4,0 mm
T6 NR044	T6 STANDART DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:5,0 mm
T6 SD045	T6 STANDART DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,0 mm
T6 SD046	T6 STANDART DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0 mm
T6 SD047	T6 STANDART DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0 mm
T6 SD048	T6 STANDART DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4,0 mm
T6 SD049	T6 STANDART DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:5,0 mm
T6 WD050	T6 STANDART DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,5 mm
T6 WD051	T6 STANDART DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0 mm
T6 WD052	T6 STANDART DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4,5 mm
T6 NR001	T6 ÜNİVERSAL DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 SD002	T6 ÜNİVERSAL DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 WD003	T6 ÜNİVERSAL DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 NR004	T6 ÜNİVERSAL DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM NO-HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 SD005	T6 ÜNİVERSAL DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM NO-HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 WD006	T6 ÜNİVERSAL DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM NO-HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 NR120	T6 AÇILI (15°) DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1 mm
T6 NR121	T6 AÇILI (15°) DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2 mm
T6 NR122	T6 AÇILI (15°) DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3 mm
T6 NR123	T6 AÇILI (15°) DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4 mm
T6 SD128	T6 AÇILI (15°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1 mm
T6 SD129	T6 AÇILI (15°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2 mm
T6 SD130	T6 AÇILI (15°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3 mm
T6 SD131	T6 AÇILI (15°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4 mm
T6 SD132	T6 AÇILI (25°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1 mm
T6 SD133	T6 AÇILI (25°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2 mm
T6 SD134	T6 AÇILI (25°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3 mm
T6 SD135	T6 AÇILI (25°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4 mm
T6 WD136	T6 AÇILI (15°) DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,5 mm
T6 WD137	T6 AÇILI (15°) DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0 mm
T6 WD138	T6 AÇILI (15°) DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:5,0 mm
T6 WD140	T6 AÇILI (25°) DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,5 mm
T6 WD141	T6 AÇILI (25°) DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0 mm
T6 WD142	T6 AÇILI (25°) DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:5,0 mm
T6 NR005	T6 ESTETİK DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,0-2,0 mm
T6 NR006	T6 ESTETİK DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0-3,0 mm



T6 ÜRÜN LİSTESİ

Kod	Açıklama
T6 SD007 T6 SD008	T6 ESTETİK DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,0-2,0 mm T6 ESTETİK DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0-3,0 mm
T6 WD009 T6 WD010	T6 ESTETİK DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,5-2,5 mm T6 ESTETİK DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,5-3,5 mm
T6 32035	T6 TELESKOPİK DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 NR101 T6 NR102 T6 NR103	T6 ESTETİK AÇILI (15°) DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,0-2,0 mm T6 ESTETİK AÇILI (15°) DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0-3,0 mm T6 ESTETİK AÇILI (15°) DAYANAK DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0-4,0 mm
T6 SD109 T6 SD110 T6 SD111	T6 ESTETİK AÇILI (15°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,0-2,0 mm T6 ESTETİK AÇILI (15°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0-3,0 mm T6 ESTETİK AÇILI (15°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0-4,0 mm
T6 SD112 T6 SD113 T6 SD114	T6 ESTETİK AÇILI (25°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,0-2,0 mm T6 ESTETİK AÇILI (25°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0-3,0 mm T6 ESTETİK AÇILI (25°) DAYANAK STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0-4,0 mm
T6 WD117 T6 WD118	T6 ESTETİK AÇILI (15°) DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0-3,0 mm T6 ESTETİK AÇILI (25°) DAYANAK GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0-3,0 mm
T6 32022 T6 32023	T6 GEÇİCİ DAYANAK Ø 5,0 mm PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN PEEK HEX T6 GEÇİCİ DAYANAK Ø 5,0 mm PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN PEEK NO-HEX
T6 32034	T6 GEÇİCİ İYİLEŞME BAŞLIĞI Ø 6,0 mm PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN PEEK
T6 NR512 T6 NR513 T6 NR514	T6 İYİLEŞME BAŞLIĞI DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0 mm T6 İYİLEŞME BAŞLIĞI DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4,0 mm T6 İYİLEŞME BAŞLIĞI DAR PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:6,0 mm
T6 SD515 T6 SD516 T6 SD517	T6 İYİLEŞME BAŞLIĞI STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0 mm T6 İYİLEŞME BAŞLIĞI STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4,0 mm T6 İYİLEŞME BAŞLIĞI STANDART PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:6,0 mm
T6 WD518 T6 WD519 T6 WD520	T6 İYİLEŞME BAŞLIĞI GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0 mm T6 İYİLEŞME BAŞLIĞI GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4,0 mm T6 İYİLEŞME BAŞLIĞI GENİŞ PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:6,0 mm
T6 32510 T6 32511	T6 Tİ-BASE İYİLEŞME BAŞLIĞI TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4,0 mm T6 Tİ-BASE İYİLEŞME BAŞLIĞI TÜM ÇAPLAR İÇİN H:6,0 mm
T6 32611	T6 ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI) TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 32604 T6 32605	T6 ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK) TÜM ÇAPLAR İÇİN T6 ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK) TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX)
T6 32201	T6 ANALOG TÜM ÇAPLAR İÇİN
T0 32909 T0 32910 T0 32911 T0 32900	STANDART DAYANAK ÖLÇÜ KEBİ PVC DAR PLATFORM STANDART DAYANAK ÖLÇÜ KEBİ PVC STANDART PLATFORM STANDART DAYANAK ÖLÇÜ KEBİ PVC GENİŞ PLATFORM KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ PARÇALARI İÇİN KEB PVC-SARI 4'ü
T6 16000 T6 16002 T6 16006	T6 M1,6 VİDA (SİMANTE CAD-CAM Tİ BASE ABUTMENTLER KAPALI ÖLÇÜ PARÇASI İÇİN) T6 32604 - T6 32605 ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK) İÇİN VİDA KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ PARÇASI İÇİN VİDA
T6 32150 T6 32151 T6 32152	T6 Ø 3,5 İMPLANT KAPAĞI SARI T6 Ø 4,1 İMPLANT KAPAĞI YEŞİL T6 Ø 4,8 İMPLANT KAPAĞI MOR
T6 32431 T6 32432 T6 32433	T6 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:1,5 mm T6 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:3,0 mm T6 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:5,0 mm
T6 32434 T6 32435	T6 MULTİ ÜNİT DAYANAK(17°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:1,5/3,1 mm T6 MULTİ ÜNİT DAYANAK(17°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:2,4/4,0 mm

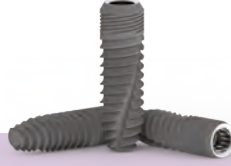

T6 ÜRÜN LİSTESİ

Kod	Açıklama
T6 32436 T6 32437	T6 MULTİ ÜNİT DAYANAK(30°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:1,25/4,0 mm T6 MULTİ ÜNİT DAYANAK(30°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:2,0/4,75 mm
T6 32438 T6 32439 T6 32440	T6 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:1,5 mm T6 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:3,0 mm T6 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:5,0 mm
T0 32905 T0 32901 T0 32902 T0 32908 T0 32904	MULTİ ÜNİT DAYANAK COMFORT KEP Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK BURN-OUT KEP NO-HEX Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK BURN-OUT KEP HEX Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK TİTANYUM KEP NO-HEX Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK TİTANYUM KEP HEX Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
T0 32607 T0 32608 T0 32609 T0 32610	MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI / NO-HEX) Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK / NO-HEX) Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI / HEX) Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK / HEX) Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
T0 32203	MULTİ ÜNİT DAYANAK ANALOG (T3/Tpure/T5/T6)
T6 16005 T0 16003 T0 16004 T0 32033 T0 32808	1,6 M VİDA (T6 İMPLANT - MULTİ ÜNİT DAYANAK BAĞLANTI VİDASI) 1,6 M VİDA (MULTİ ÜNİT DAYANAK OKLUZAL VE TÜM KEPLER İÇİN) (T3/Tpure/T5/T6) 1,6 M VİDA (MULTİ ÜNİT DAYANAK AÇIK ÖLÇÜ PARÇASI İÇİN) (T3/Tpure/T5/T6) CAD-CAM MULTİ ÜNİT TARAMA GÖVDESİ PEEK (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT TİBASE DAYANAK
T6 32800 T6 32801	T6 UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK NO-HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN T6 UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 32907 T0 32907 T6 16001	UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK BURN-OUT KEB VİDA İLE BİRLİKTE UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK BURN-OUT KEB (T3/Tpure/T5/T6) T6 UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK - İMPLANT BAĞLANTI VİDASI
T6 32804 T6 32805	T6 CAD-CAM NUCLEOSS TİBASE DAYANAK 4,5 PLATFORM HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN T6 CAD-CAM NUCLEOSS TİBASE DAYANAK 4,5 PLATFORM NO-HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 32897	T6 CAD-CAM TARAMA GÖVDESİ PEEK İMPLANT VE ANALOG ÜSTÜNDEN TÜM ÇAPLAR İÇİN
T6 32802 T0 32949	T6 CAD-CAM CEREC TİBASE DAYANAK 4,5 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN TARAMA PARÇASI CEREC İÇİN
T6 PR01	T6 PREMILL ABUTMENT
T6 32301 T6 32302 T6 32303	T6 TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 1,5 mm T6 TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 3,0 mm T6 TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 5,0 mm
T0 32615 T0 4521	TOPUZ DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (T1/T3/Tpure/T5/T6) TOPUZ DAYANAK ANALOG (T1/T3/Tpure/T5/T6)
T0 5207 T0 4500-16 T0 4500-7 T0 5200 T0 4500-3 T0 5201 T0 4500-4 T0 4500-18	KAPALI METAL YUVA VE PLASTİĞİ KAPALI METAL YUVA İÇİN SARI PLASTİK ORTA SERT 4 LÜ KAPALI METAL YUVA İÇİN TURUNCU PLASTİK YUMUŞAK 4 LÜ METAL YÜZÜK VE SİLİKON HALKASI METAL YÜZÜK İÇİN SİLİKON HALKA SİYAH ORTA SERT 4 LÜ METAL KADEH VE PLASTİĞİ METAL KADEH İÇİN PLASTİK 4 LÜ TOPUZ DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASININ SİLİKONU 4 LÜ
T6 32700 T6 32701 T6 32702	T6 EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,5 mm T6 EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0 mm T6 EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:5,0 mm
044CAIN 144AE	EQUATOR DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI EQUATOR DAYANAK ANALOG
CA008 CN051 CN052 CN053 CN068 774CHE	EQUATOR METAL YUVA 4 LÜ EQUATOR ŞEFFAF KEP EXTRA SERT (1,8 KG) 4 LÜ EQUATOR PEMBE KEP SERT (1,2 KG) 4 LÜ EQUATOR SARI KEP YUMUŞAK (0,6 KG) 4 LÜ EQUATOR SİYAH KEP LABORATUVAR İÇİN 4 LÜ EQUATOR DAYANAK SIKMA ANAHTARI KARE RAŞETLE



T6 ÜRÜN LİSTESİ

Kod	Açıklama
760CE 124ICP-N 191ECS	EQUATOR DAYANAK SIKMA ANAHTARI MOTOR KEB YERLEŞTİRME APARATI (MAVİ SAP+ METAL UÇ) METAL YUVADAN KEB ÇIKARMA APARATI (ŞEFFAF SAPLI)
CRH-109 CRH-108	T6 CERRAHİ VE PROTEZ SETİ T1/T3/Tpure/T5/T6 PROTEZ SETİ
T0 2022 T0 25900	TORNAVİDA TORKLU RAŞET
TRF-601 DRL-601 DRL-003 DRL-602 DRL-603 DRL-604 DRL-605 EXP-601 CTK-601	T6 İMPLANT TAŞIMA VE SIKMA ANAHTAR SET T6 STOPERLİ DRILL SET (TAMAMI - 17 ADET) PILOT DRILL SET (4 ADET) T6 Ø 3.5 mm STOPERLİ DRILL (4 ADET) T6 Ø 4,1 mm STOPERLİ DRILL (4 ADET) T6 Ø 4,8 mm STOPERLİ DRILL (4 ADET) T6 SERT KEMİK DRİLLERİ / STOPERSİZ (Ø3.5 /4,1 /4,8 mm) T6 YUVA GENİŞLETÇİ SET (Ø3.5 /4,1 /4,8 mm) T6 BOYUN GENİŞLETÇİ SET (Ø3.5 /4,1 /4,8 mm)
T0 25024 T0 0102 T0 2012-1	PUNTA DRILL ROUND DRILL DRILL UZATMA
T0 25001 T0 25002 T0 25003 T0 25004	PILOT DRILL Ø 2.4 / L: 8 mm (T1/T2/T3/Tpure/T6) PILOT DRILL Ø 2.4 / L: 10 mm (T1/T2/T3/Tpure/T6) PILOT DRILL Ø 2.4 / L: 12 mm (T1/T2/T3/Tpure/T6) PILOT DRILL Ø 2.4 / L: 14 mm (T1/T2/T3/Tpure/T6)
T6 25005 T6 25006 T6 25007 T6 25025	T6 STOPERLİ DRILL Ø 3,5 / 8,0 mm T6 STOPERLİ DRILL Ø 3,5 / 10 mm T6 STOPERLİ DRILL Ø 3,5 / 12 mm T6 STOPERLİ DRILL Ø 3,5 / 14 mm
T6 25009 T6 25010 T6 25011 T6 25026	T6 STOPERLİ DRILL Ø 4,1 / 8,0 mm T6 STOPERLİ DRILL Ø 4,1 / 10 mm T6 STOPERLİ DRILL Ø 4,1 / 12 mm T6 STOPERLİ DRILL Ø 4,1 / 14 mm
T6 25013 T6 25014 T6 25015 T6 25027	T6 STOPERLİ DRILL Ø 4,8 / 8,0 mm T6 STOPERLİ DRILL Ø 4,8 / 10 mm T6 STOPERLİ DRILL Ø 4,8 / 12 mm T6 STOPERLİ DRILL Ø 4,8 / 14 mm
T6 25017 T6 25018 T6 25019	T6 SERT KEMİK DRİLL Ø 3,5 mm T6 SERT KEMİK DRİLL Ø 4,1 mm T6 SERT KEMİK DRİLL Ø 4,8 mm
T6 25151 T6 25152 T6 25153	T6 BOYUN GENİŞLETİCİ Ø 3,5 mm T6 BOYUN GENİŞLETİCİ Ø 4,1 mm T6 BOYUN GENİŞLETİCİ Ø 4,8 mm
T6 25353 T6 25354 T6 25355	T6 YUVA GENİŞLETİCİ Ø 3,5 mm T6 YUVA GENİŞLETİCİ Ø 4,1 mm T6 YUVA GENİŞLETİCİ Ø 4,8 mm
T0 2009 T0 2010 T0 2011 T0 25251 T0 25252	HEX ANAHTARI MOTOR HEX ANAHTARI (UZUN) RAŞETLE HEX ANAHTARI (KISA) RAŞETLE HEX ANAHTARI ELLE TAŞIMA VE SIKMA HEX ANAHTARI (UZUN) RAŞETLE
T0 25205 T0 25206	TOPUZ DAYANAK SIKMA ANAHTARI (T1/T3/Tpure/T5/T6) VİDALI DAYANAK SIKMA ANAHTARI (T3/Tpure/T5/T6)
T0 2014-1 T0 25305 T0 25306 T0 25207	PARALEL PİN PARALEL PİN (17 °) PARALEL PİN (30 °) RAŞET ADAPTÖR

T5 ÜRÜN LİSTESİ



Kod	Açıklama
T5 4805	T5 İMPLANT GÖVDE 4,8x05 mm
T5 4806	T5 İMPLANT GÖVDE 4,8x06 mm
T5 4807	T5 İMPLANT GÖVDE 4,8x07 mm
T5 5505	T5 İMPLANT GÖVDE 5,5x05 mm
T5 5506	T5 İMPLANT GÖVDE 5,5x06 mm
T5 5507	T5 İMPLANT GÖVDE 5,5x07 mm
T5 6205	T5 İMPLANT GÖVDE 6,2x05 mm
T5 6206	T5 İMPLANT GÖVDE 6,2x06 mm
T5 6207	T5 İMPLANT GÖVDE 6,2x07 mm
T5 5801	T5 DÜZ DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,0 mm
T5 5802	T5 DÜZ DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0 mm
T5 5803	T5 DÜZ DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0 mm
T5 32022	T5 GEÇİCİ DAYANAK (HEX) PEEK TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 32023	T5 GEÇİCİ DAYANAK (NO-HEX) PEEK TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 5812-10	T5 AÇILI (10°) DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0 mm
T5 5814-10	T5 AÇILI (10°) DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4,0 mm
T5 5812-20	T5 AÇILI (20°) DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0 mm
T5 5814-20	T5 AÇILI (20°) DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4,0 mm
T5 5812-30	T5 AÇILI (30°) DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0 mm
T5 5814-30	T5 AÇILI (30°) DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:4,0 mm
T5 5852	T5 İYİLEŞME BAŞLIĞI TÜM ÇAPLAR İÇİN H: 2 mm
T5 5853	T5 İYİLEŞME BAŞLIĞI TÜM ÇAPLAR İÇİN H: 3 mm
T5 5855	T5 İYİLEŞME BAŞLIĞI TÜM ÇAPLAR İÇİN H: 5 mm
T5 32034	T5 GEÇİCİ İYİLEŞME BAŞLIĞI PEEK TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 4940-1	T5 ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI) TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 4940	T5 ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK) TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 4941	T5 ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK) TÜM ÇAPLAR İÇİN NO-HEX
T5 5820	T5 ANALOG TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 4315	T5 İMPLANT KAPAĞI
T5 2000	M2 VİDA
T5 2001	T5 AÇIK KAŞIK ÖLÇÜ PARÇASI İÇİN M2 VİDA
T5 5041	T5 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:1,5 mm
T5 5042	T5 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:3,0 mm
T5 5043	T5 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:5,0 mm
T5 5044	T5 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:1,5 mm
T5 5045	T5 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:3,0 mm
T5 5046	T5 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:5,0 mm
T5 5541-17	T5 MULTİ ÜNİT DAYANAK(17°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,50/3,1 mm
T5 5542-17	T5 MULTİ ÜNİT DAYANAK(17°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,4/4,0 mm
T5 5543-30	T5 MULTİ ÜNİT DAYANAK(30°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,25/4,0 mm
T5 5544-30	T5 MULTİ ÜNİT DAYANAK(30°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0/4,75 mm
T0 32905	MULTİ ÜNİT DAYANAK COMFORT KEP (T3/Tpure/T5/T6) Ø 5,0 PLATFORM
T0 32901	MULTİ ÜNİT DAYANAK BURN-OUT KEP NO-HEX (T3/Tpure/T5/T6) Ø 5,0 PLATFORM
T0 32902	MULTİ ÜNİT DAYANAK BURN-OUT KEP HEX Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
T0 32908	MULTİ ÜNİT DAYANAK TİTANYUM KEP NO-HEX (T3/Tpure/T5/T6) Ø 5,0 PLATFORM
T0 32904	MULTİ ÜNİT DAYANAK TİTANYUM KEP HEX Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
T0 32607	MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI-NOHEX) (T3/Tpure/T5/T6) Ø 5,0 PLATFORM
T0 32608	MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK-NOHEX) (T3/Tpure/T5/T6) Ø 5,0 PLATFORM
T0 32609	MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI / HEX) Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
T0 32610	MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK / HEX) Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
T0 32203	MULTİ ÜNİT DAYANAK ANALOG (T3/Tpure/T5/T6)
T5 2004	T5 İMPLANT - MULTİ ÜNİT DAYANAK BAĞLANTI VİDASI
T0 16003	1,6 M VİDA (MULTİ ÜNİT DAYANAK OKLUZAL VE TÜM KEPLERİ İÇİN) (T3/Tpure/T5/T6)
T0 16004	1,6 M VİDA (MULTİ ÜNİT DAYANAK AÇIK ÖLÇÜ PARÇASI İÇİN) (T3/Tpure/T5/T6)
T0 32900	T3/Tpure/T5/T6 KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ PARÇALARI İÇİN KEP PVC-SARI / 4'lü
T0 32033	CAD-CAM MULTİ ÜNİT TARAMA GÖVDESİ PEEK (T3/Tpure/T5/T6)
T0 32808	MULTİ ÜNİT TİBASE DAYANAK

T5 ÜRÜN LİSTESİ



Kod	Açıklama
T5 5030	T5 TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 1,5 mm
T5 5031	T5 TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 3,0 mm
T5 5032	T5 TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 5,0 mm
T0 32615	TOPUZ DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (T1/T3/Tpure/T5/T6)
T0 4521	TOPUZ DAYANAK ANALOG (T1/T3/Tpure/T5/T6)
T0 5207	KAPALI METAL YUVA VE PLASTİĞİ
T0 4500-16	KAPALI METAL YUVA İÇİN SARI PLASTİK ORTA SERT 4 LÜ
T0 4500-7	KAPALI METAL YUVA İÇİN TURUNCU PLASTİK YUMUŞAK 4 LÜ
T0 5200	METAL YÜZÜK VE SİLİKON HALKASI
T0 4500-3	METAL YÜZÜK İÇİN SİLİKON HALKA SİYAH ORTA SERT 4 LÜ
T0 5201	METAL KADEH VE PLASTİĞİ
T0 4500-4	METAL KADEH İÇİN PLASTİK 4 LÜ
T0 4500-18	TOPUZ DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASININ SİLİKONU 4 LÜ
T5 5070	T5 EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,5 mm
T5 5071	T5 EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0 mm
T5 5072	T5 EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:5,0 mm
044CAIN	EQUATOR DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI
144AE	EQUATOR DAYANAK ANALOG
CA008	EQUATOR METAL YUVA 4 LÜ
CN051	EQUATOR ŞEFFAF KEP EXTRA SERT (1,8 KG) 4 LÜ
CN052	EQUATOR PEMBE KEP SERT (1,2 KG) 4 LÜ
CN053	EQUATOR SARI KEP YUMUŞAK (0,6 KG) 4 LÜ
CN068	EQUATOR SİYAH KEP LABORATUVAR İÇİN 4 LÜ
774CHE	EQUATOR DAYANAK SIKMA ANAHTARI KARE RAŞETLE
760CE	EQUATOR DAYANAK SIKMA ANAHTARI MOTOR
124ICP-N	KEB YERLEŞTİRME APARATI (MAVİ SAP+ METAL UÇ)
191ECS	METAL YUVADAN KEB ÇIKARMA APARATI (ŞEFFAF SAPLI)
T5 5080	T5 UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK 5,0 PLATFORM NOHEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 5081	T5 UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK 5,0 PLATFORM HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 32907	UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK BURN-OUT KEP VİDA İLE BİRLİKTE
T0 32907	UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK BURN-OUT KEP (T3/Tpure/T5/T6)
T5 16001	T5 UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK - İMPLANT BAĞLANTI VİDASI
T5 32806	T5 CAD-CAM NUCLEOSS TİBASE DAYANAK HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 32807	T5 CAD-CAM NUCLEOSS TİBASE DAYANAK NO-HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 32897	T5 CAD-CAM TARAMA GÖVDESİ PEEK TÜM ÇAPLAR İÇİN
T5 32803	T5 CAD-CAM CEREC TİBASE DAYANAK HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T0 32949	TARAMA PARÇASI CEREC İÇİN
CRH-106	T5 CERRAHİ VE PROTEZ SET
CRH-108	T1/T3/Tpure/T5/T6 PROTEZ SETİ
DRL-002	T5 STOPERLİ DRILL SET (TAMAMI - 12 ADET)
DRL-004	T5 PİLOT DRILL SET (3 ADET)
DRL-009	T5 4,8 mm DRILL SET (3 ADET)
DRL-010	T5 5,5 mm DRILL SET (3 ADET)
DRL-011	T5 6,2 mm DRILL SET (3 ADET)
TAP-002	T5 YİV AÇICI SET (Ø 4,8 / 5,5 / 6,2 mm)
T0 25900	TORKLU RAŞET ANAHTARI
T0 2022	TORNAVİDA
T0 25024	PUNTA DRILL
T0 0102	ROUND DRILL
T0 2012-1	DRILL UZATMA
T5 0125	T5 PILOT DRILL L: 5 mm
T5 0126	T5 PILOT DRILL L: 6 mm
T5 0127	T5 PILOT DRILL L: 7 mm

T5 ÜRÜN LİSTESİ



Kod	Açıklama
T5 0145	T5 Ø 4,8 DRILL L: 5 mm
T5 0146	T5 Ø 4,8 DRILL L: 6 mm
T5 0147	T5 Ø 4,8 DRILL L: 7 mm
T5 0155	T5 Ø 5,5 DRILL L: 5 mm
T5 0156	T5 Ø 5,5 DRILL L: 6 mm
T5 0157	T5 Ø 5,5 DRILL L: 7 mm
T5 0165	T5 Ø 6,2 DRILL L: 5 mm
T5 0166	T5 Ø 6,2 DRILL L: 6 mm
T5 0167	T5 Ø 6,2 DRILL L: 7 mm
T5 0448	T5 YİV AÇICI Ø 4,8
T5 0455	T5 YİV AÇICI Ø 5,5
T5 0462	T5 YİV AÇICI Ø 6,2
T0 2010	HEX ANAHTARI (UZUN) RAŞETLE
T0 2011	HEX ANAHTARI (KISA) RAŞETLE
T0 2013	HEX ANAHTARI ELLE TAŞIMA VE SIKMA
T5 2005	T5 İMPLANT SIKMA ANAHTARI RAŞETLE KISA
T5 2006	T5 İMPLANT SIKMA ANAHTARI RAŞETLE (UZUN)
T0 2007	T5 / Tpure / T3 İMPLANT TAŞIMA VE SIKMA ANAHTARI (ELLE)
T0 2008	T5 / Tpure / T3 İMPLANT TAŞIMA VE SIKMA ANAHTARI (MOTOR)
T0 25206	VİDALI DAYANAK SIKMA ANAHTARI (T3/Tpure/T5/T6)
T0 25205	TOPUZ DAYANAK SIKMA ANAHTARI (T1/T3/Tpure/T5/T6)
T0 2014-1	PARALEL PİN



Tpure ÜRÜN LİSTESİ

Kod	Açıklama
T43410	Tpure İMPLANT GÖVDE 3,4x10 mm
T43412	Tpure İMPLANT GÖVDE 3,4x12 mm
T43414	Tpure İMPLANT GÖVDE 3,4x14 mm
T43808	Tpure İMPLANT GÖVDE 3,8x08 mm
T43810	Tpure İMPLANT GÖVDE 3,8x10 mm
T43812	Tpure İMPLANT GÖVDE 3,8x12 mm
T43814	Tpure İMPLANT GÖVDE 3,8x14 mm
T44208	Tpure İMPLANT GÖVDE 4,2x08 mm
T44210	Tpure İMPLANT GÖVDE 4,2x10 mm
T44212	Tpure İMPLANT GÖVDE 4,2x12 mm
T44214	Tpure İMPLANT GÖVDE 4,2x14 mm
T45008	Tpure İMPLANT GÖVDE 5,0x08 mm
T45010	Tpure İMPLANT GÖVDE 5,0x10 mm
T45012	Tpure İMPLANT GÖVDE 5,0x12 mm
T45014	Tpure İMPLANT GÖVDE 5,0x14 mm
T44001	Tpure DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 1.0 mm
T44002	Tpure DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2.0 mm
T44003	Tpure DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 3.0 mm
T44005	Tpure DÜZ DAYANAK DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 5.0 mm
T44801	Tpure DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 1.0 mm
T44802	Tpure DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2.0 mm
T44803	Tpure DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 3.0 mm
T44805	Tpure DÜZ DAYANAK STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 5.0 mm
T46001	Tpure DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM Ø 5,0 mm H: 1,0 mm
T46002	Tpure DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM Ø 5,0 mm H: 2,0 mm
T46003	Tpure DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM Ø 5,0 mm H: 3,0 mm
T46005	Tpure DÜZ DAYANAK GENİŞ PLATFORM Ø 5,0 mm H: 5,0 mm
T44011-10	Tpure AÇILI DAYANAK 10° DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 1.0 mm
T44012-10	Tpure AÇILI DAYANAK 10° DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2.0 mm
T44013-10	Tpure AÇILI DAYANAK 10° DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 3.0 mm
T44011-20	Tpure AÇILI DAYANAK 20° DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 1.0 mm
T44012-20	Tpure AÇILI DAYANAK 20° DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2.0 mm
T44013-20	Tpure AÇILI DAYANAK 20° DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 3.0 mm
T44014-20	Tpure AÇILI DAYANAK 20° DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 4.0 mm
T44011-30	Tpure AÇILI DAYANAK 30° DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 1.0 mm
T44012-30	Tpure AÇILI DAYANAK 30° DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2.0 mm
T44013-30	Tpure AÇILI DAYANAK 30° DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 3.0 mm
T44811-10	Tpure AÇILI DAYANAK 10° STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 1.0 mm
T44812-10	Tpure AÇILI DAYANAK 10° STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2.0 mm
T44813-10	Tpure AÇILI DAYANAK 10° STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 3.0 mm
T44811-20	Tpure AÇILI DAYANAK 20° STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 1.0 mm
T44812-20	Tpure AÇILI DAYANAK 20° STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2.0 mm
T44813-20	Tpure AÇILI DAYANAK 20° STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 3.0 mm
T44814-20	Tpure AÇILI DAYANAK 20° STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 4.0 mm
T44811-30	Tpure AÇILI DAYANAK 30° STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 1.0 mm
T44812-30	Tpure AÇILI DAYANAK 30° STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2.0 mm
T44813-30	Tpure AÇILI DAYANAK 30° STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 3.0 mm
T46012-10	Tpure AÇILI DAYANAK 10° GENİŞ PLATFORM Ø 5.0 mm H: 2.0 mm
T46012-20	Tpure AÇILI DAYANAK 20° GENİŞ PLATFORM Ø 5.0 mm H: 2.0 mm
T46012-30	Tpure AÇILI DAYANAK 30° GENİŞ PLATFORM Ø 5.0 mm H: 2.0 mm
T432034	Tpure GEÇİCİ İYİLEŞME BAŞLIĞI PEEK TÜM ÇAPLAR İÇİN
T432022	Tpure GEÇİCİ DAYANAK (HEX) PEEK TÜM ÇAPLAR İÇİN
T432023	Tpure GEÇİCİ DAYANAK (NO-HEX) PEEK TÜM ÇAPLAR İÇİN



Tpure ÜRÜN LİSTESİ

Kod	Açıklama
T44052	Tpure İYİLEŞME BAŞLIĞI DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2.0 mm
T44054	Tpure İYİLEŞME BAŞLIĞI DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 4.0 mm
T44056	Tpure İYİLEŞME BAŞLIĞI DAR PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 6.0 mm
T44852	Tpure İYİLEŞME BAŞLIĞI STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2.0 mm
T44854	Tpure İYİLEŞME BAŞLIĞI STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 4.0 mm
T44856	Tpure İYİLEŞME BAŞLIĞI STANDART PLATFORM Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 6.0 mm
T46052	Tpure İYİLEŞME BAŞLIĞI GENİŞ PLATFORM Ø 5.0 mm H: 2.0 mm
T46054	Tpure İYİLEŞME BAŞLIĞI GENİŞ PLATFORM Ø 5.0 mm H: 4.0 mm
T46056	Tpure İYİLEŞME BAŞLIĞI GENİŞ PLATFORM Ø 5.0 mm H: 6.0 mm
T44240	Tpure ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK KAŞIK) Ø 3.4 / 3.8 / 4.2 İMPLANT İÇİN
T44240-1	Tpure ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI KAŞIK) Ø 3.4 / 3.8 / 4.2 İMPLANT İÇİN
T44241	Tpure ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK KAŞIK) NO-HEX / Ø 3.4 / 3.8 / 4.2 İMPLANT İÇİN
T45540	Tpure ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK KAŞIK) Ø 5.0 mm İMPLANT İÇİN
T45541	Tpure ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK KAŞIK) NO-HEX Ø 5.0 mm İMPLANT İÇİN
T45540-1	Tpure ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI KAŞIK) Ø 5.0 mm İMPLANT İÇİN
T44020	Tpure ANALOG Ø 3.4/3.8/4.2 mm GÖVDELER İÇİN
T44820	Tpure ANALOG Ø 5.0 mm GÖVDELER İÇİN
T44061	Tpure STANDART DAYANAK DAR PLATFORM H:2,0 mm
T44861	Tpure STANDART DAYANAK STANDART PLATFORM H:2,0 mm
T46061	Tpure STANDART DAYANAK GENİŞ PLATFORM H:2,0 mm
TO 32909	STANDART DAYANAK ÖLÇÜ KEBİ PVC DAR PLATFORM
TO 32910	STANDART DAYANAK ÖLÇÜ KEBİ PVC STANDART PLATFORM
TO 32911	STANDART DAYANAK ÖLÇÜ KEBİ PVC GENİŞ PLATFORM
TO 32912	KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ PARÇALARI İÇİN KEB PVC-SARI 4'lü
TO 2001	M2 VİDA Tpure/T3
TO 2001-1	AÇIK KAŞIK ÖLÇÜ PARÇASI İÇİN M2 VİDA
T43615	Tpure KAPAK Ø 3.4 mm (SARI)
T44215	Tpure KAPAK Ø 3,8/4.2 mm (YEŞİL)
T45015	Tpure KAPAK Ø 5,0 mm (MOR)
T45045	Tpure MULTİ UNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:1,5 mm
T45046	Tpure MULTİ UNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:3,0 mm
T45047	Tpure MULTİ UNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:5,0 mm
T45048	Tpure MULTİ UNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:1,5 mm
T45049	Tpure MULTİ UNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:3,0 mm
T45050	Tpure MULTİ UNİT DAYANAK(0°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:5,0 mm
T45541-17	Tpure MULTİ UNİT DAYANAK(17°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,5/3,1 mm
T45542-17	Tpure MULTİ UNİT DAYANAK(17°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,4/4,0 mm
T45543-30	Tpure MULTİ UNİT DAYANAK(30°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,25/4,0 mm
T45544-30	Tpure MULTİ UNİT DAYANAK(30°) Ø 5,0 PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0/4,75 mm
TO 32905	MULTİ UNİT DAYANAK COMFORT KEP (T3/Tpure/T5/T6) Ø 5,0 PLATFORM
TO 32901	MULTİ UNİT DAYANAK BURN-OUT KEP NO-HEX (T3/Tpure/T5/T6) Ø 5,0 PLATFORM
TO 32902	MULTİ UNİT DAYANAK BURN-OUT KEP HEX Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
TO 32908	MULTİ UNİT DAYANAK TİTANYUM KEP NO-HEX (T3/Tpure/T5/T6) Ø 5,0 PLATFORM
TO 32904	MULTİ UNİT DAYANAK TİTANYUM KEP HEX Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
TO 32607	MULTİ UNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI-NOHEX) (T3/Tpure/T5/T6) Ø 5,0 PLATFORM
TO 32608	MULTİ UNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK-NOHEX) (T3/Tpure/T5/T6) Ø 5,0 PLATFORM
TO 32609	MULTİ UNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI / HEX) Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
TO 32610	MULTİ UNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK / HEX) Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
TO 32203	MULTİ UNİT DAYANAK ANALOG (T3/Tpure/T5/T6)
T42004	Tpure İMPLANT - MULTİ UNİT DAYANAK BAĞLANTI VİDASI
TO 16003	1,6 M VİDA (MULTİ UNİT DAYANAK OKLUZAL VE TÜM KEPLERİ İÇİN) (T3/Tpure/T5/T6)
TO 16004	1,6 M VİDA (MULTİ UNİT DAYANAK AÇIK ÖLÇÜ PARÇASI İÇİN) (T3/Tpure/T5/T6)
TO 32033	CAD-CAM MULTİ UNİT TARAMA GÖVDESİ PEEK (T3/Tpure/T5/T6)
TO 32808	MULTİ UNİT TİBASE DAYANAK
T44531	Tpure TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 1,5 mm
T44532	Tpure TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 3,0 mm
T44533	Tpure TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 5,0 mm
TO 32615	TOPUZ DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (T1/T3/Tpure/T5/T6)
TO 4521	TOPUZ DAYANAK ANALOG (T1/T3/Tpure/T5/T6)



Tpure ÜRÜN LİSTESİ

Kod	Açıklama
T0 5207	KAPALI METAL YUVA VE PLASTİĞİ
T0 4500-16	KAPALI METAL YUVA İÇİN SARI PLASTİK ORTA SERT 4 LÜ
T0 4500-7	KAPALI METAL YUVA İÇİN TURUNCU PLASTİK YUMUŞAK 4 LÜ
T0 5200	METAL YÜZÜK VE SİLİKON HALKASI
T0 4500-3	METAL YÜZÜK İÇİN SİLİKON HALKA SİYAH ORTA SERT 4 LÜ
T0 5201	METAL KADEH VE PLASTİĞİ
T0 4500-4	METAL KADEH İÇİN PLASTİK 4 LÜ
T0 4500-18	TOPUZ DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASININ SİLİKONU 4 LÜ
T44570	Tpure EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,5 mm
T44571	Tpure EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0 mm
T44572	Tpure EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:5,0 mm
044CAIN	EQUATOR DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI
144AE	EQUATOR DAYANAK ANALOG
CA008	EQUATOR METAL YUVA 4 LÜ
CN051	EQUATOR ŞEFFAF KEP EXTRA SERT (1,8 KG) 4 LÜ
CN052	EQUATOR PEMBE KEP SERT (1,2 KG) / 4 LÜ
CN053	EQUATOR SARI KEP YUMUŞAK (0,6 KG) 4 LÜ
CN068	EQUATOR SİYAH KEP LABORATUVAR İÇİN 4 LÜ
774CHE	EQUATOR DAYANAK SIKMA ANAHTARI KARE RAŞETLE
760CE	EQUATOR DAYANAK SIKMA ANAHTARI MOTOR
124ICP-N	KEP YERLEŞTİRME APARATI (MAVİ SAP+ METAL UÇ)
191ECS	METAL YUVADAN KEP ÇIKARMA APARATI (ŞEFFAF SAPLI)
T44080	Tpure UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK NO-HEX Ø 3.4/3.8./4.2 mm
T44081	Tpure UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK HEX Ø3.4/3.8./4.2 mm
T44580	Tpure UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK NO-HEX Q 5,0 mm
T44581	Tpure UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK HEX Q 5,0 mm
T0 32907	UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK BURN-OUT KEP
T432907	UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK BURN-OUT KEP BAĞLANTI VİDASI İLE BİRLİKTE
T416001	BAĞLANTI VİDASI - Tpure UNİVERSAL DÖKÜM TİBASE DAYANAK
T432804	Tpure CAD-CAM NUCLEOSS TİBASE DAYANAK / HEX / Ø 3.4/3.8./4.2 mm
T432805	Tpure CAD-CAM NUCLEOSS TİBASE DAYANAK / NO-HEX / Ø 3.4/3.8./4.2 mm
T432806	Tpure CAD-CAM NUCLEOSS TİBASE DAYANAK / HEX / Ø 5,0 mm
T432807	Tpure CAD-CAM NUCLEOSS TİBASE DAYANAK / NO-HEX / Ø 5,0 mm
T432897	Tpure CAD-CAM TARAMA GÖVDESİ PEEK Ø 3.4/3.8./4.2 mm
T432898	CAD-CAM TARAMA GÖVDESİ PEEK Ø 5,0 mm
T0 2001	Tpure CAD-CAM NUCLEOSS Tİ BASE DAYANAK - İMPLANT BAĞLANTI VİDASI
T432802	CAD-CAM CEREC TİBASE DAYANAK Ø 3.4/3.8./4.2 mm
T432803	CAD-CAM CEREC TİBASE DAYANAK Ø 5,0 mm
T0 32949	TARAMA PARÇASI CEREC İÇİN
CRH-105-1	CERRAHİ VE PROTEZ SET (Tpure / T3 / T2 / T1)
CRH-108	T1/T3/Tpure/T5/T6 PROTEZ SETİ
T0 25900	TORKLU RAŞET
T0 2022	TORNAVİDA
DRL-001	Tpure T3 STOPERLİ DRILL SET (TAMAMI - 21 ADET)
DRL-003	PILOT DRILL SET (4 ADET)
DRL-005	Tpure /T3 Ø3.4 mm STOPERLİ DRILL (4 ADET)
DRL-006	Tpure /T3 Ø3.8 mm STOPERLİ DRILL (4 ADET)
DRL-007	Tpure /T3 Ø4.2 mm STOPERLİ DRILL (4 ADET)
DRL-008	Tpure /T3 Ø5.0 mm STOPERLİ DRILL (4 ADET)
EXP-001	Tpure / T3 YUVA GENİŞLETİCİ SET (Ø3.4/3.8/4.2/5.0 mm)
CTK-001	Tpure / T3 BOYUN GENİŞLETİCİ SET (Ø3.4/3.8/4.2/5.0 mm)
TAP-001	Tpure / T3 YİV AÇICI SET (Ø3.4/3.8/4.2/5.0 mm)
T0 25024	PUNTA DRILL
T0 0102	ROUND DRILL



Tpure ÜRÜN LİSTESİ

Kod	Açıklama
T0 2012-1	DRILL UZATMA
T0 25001	PILOT DRILL Ø 2.4 L: 8 mm (T1/T2/T3/Tpure/T6)
T0 25002	PILOT DRILL Ø 2.4 L: 10 mm (T1/T2/T3/Tpure/T6)
T0 25003	PILOT DRILL Ø 2.4 L: 12 mm (T1/T2/T3/Tpure/T6)
T0 25004	PILOT DRILL Ø 2.4 L: 14 mm (T1/T2/T3/Tpure/T6)
T0 2808	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 3,4 8,0 mm
T0 2810	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 3,4 10 mm
T0 2812	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 3,4 12 mm
T0 2814	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 3,4 14 mm
T0 3208	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 3,8 8,0 mm
T0 3210	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 3,8 10 mm
T0 3212	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 3,8 12 mm
T0 3214	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 3,8 14 mm
T0 3608	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 4,2 8,0 mm
T0 3610	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 4,2 10 mm
T0 3612	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 4,2 12 mm
T0 3614	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 4,2 14 mm
T0 4408	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 5,0 8,0 mm
T0 4410	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 5,0 10 mm
T0 4412	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 5,0 12 mm
T0 4414	Tpure / T3 STOPERLİ DRILL Ø 5,0 14 mm
T0 0234	Tpure / T3 BOYUN GENİŞLETİCİ Ø 3,4 mm
T0 0238	Tpure / T3 BOYUN GENİŞLETİCİ Ø 3,8 mm
T0 0242	Tpure / T3 BOYUN GENİŞLETİCİ Ø 4,2 mm
T0 0250	Tpure / T3 BOYUN GENİŞLETİCİ Ø 5,0 mm
T0 0334	Tpure / T3 YUVA GENİŞLETİCİ Ø 3,4 mm
T0 0338	Tpure / T3 YUVA GENİŞLETİCİ Ø 3,8 mm
T0 0342	Tpure / T3 YUVA GENİŞLETİCİ Ø 4,2 mm
T0 0350	Tpure / T3 YUVA GENİŞLETİCİ Ø 5,0 mm
T0 0434-1	Tpure / T3 YİV AÇICI Ø 3,4 mm
T0 0438-1	Tpure / T3 YİV AÇICI Ø 3,8 mm
T0 0442-1	Tpure / T3 YİV AÇICI Ø 4,2 mm
T0 0450-1	Tpure / T3 YİV AÇICI Ø 5,0 mm
T0 2009	HEX ANAHTARI MOTOR
T0 2010	HEX ANAHTARI (UZUN) RAŞETLE
T0 2011	HEX ANAHTARI (KISA) RAŞETLE
T0 2013	HEX ANAHTARI ELLE TAŞIMA VE SIKMA
T0 2005-1	Tpure / T3 İMPLANT TAŞIMA VE SIKMA ANAHTARI RAŞETLE (UZUN)
T0 2006-1	Tpure / T3 İMPLANT TAŞIMA VE SIKMA ANAHTARI RAŞETLE (KISA)
T0 2007	Tpure / T3 / T5 İMPLANT TAŞIMA VE SIKMA ANAHTARI (ELLE)
T0 2008	Tpure / T3 / T5 İMPLANT TAŞIMA VE SIKMA ANAHTARI (MOTOR)
T0 25205	TOPUZ DAYANAK SIKMA ANAHTARI (T1/T3/Tpure/T5/T6)
T0 25206	VİDALI DAYANAK SIKMA ANAHTARI (T3/Tpure/T5/T6)
T0 25207	RAŞET ADAPTÖR (T3/Tpure/T5/T6)
T2 2005	T2 İMPLANT TAŞIMA VE SIKMA ANAHTARI (RAŞETLE)
T2 2007	T2 İMPLANT TAŞIMA VE SIKMA ANAHTARI (ELLE)
T0 2014-1	PARALEL PİN
T0 25305	PARALEL PİN (17 °)
T0 25306	PARALEL PİN (30 °)

T3 ÜRÜN LİSTESİ



Kod	Açıklama
T3 3410	T3 İMPLANT GÖVDE 3,4x10 mm
T3 3412	T3 İMPLANT GÖVDE 3,4x12 mm
T3 3414	T3 İMPLANT GÖVDE 3,4x14 mm
T3 3808	T3 İMPLANT GÖVDE 3,8x08 mm
T3 3810	T3 İMPLANT GÖVDE 3,8x10 mm
T3 3812	T3 İMPLANT GÖVDE 3,8x12 mm
T3 3814	T3 İMPLANT GÖVDE 3,8x14 mm
T3 4208	T3 İMPLANT GÖVDE 4,2x08 mm
T3 4210	T3 İMPLANT GÖVDE 4,2x10 mm
T3 4212	T3 İMPLANT GÖVDE 4,2x12 mm
T3 4214	T3 İMPLANT GÖVDE 4,2x14 mm
T3 5008	T3 İMPLANT GÖVDE 5,0x08 mm
T3 5010	T3 İMPLANT GÖVDE 5,0x10 mm
T3 5012	T3 İMPLANT GÖVDE 5,0x12 mm
T3 5014	T3 İMPLANT GÖVDE 5,0x14 mm
T3 4561	T3 STANDART DAYANAK Ø 3.4/3.8/4.2 mm H:1.0 mm
T3 5061	T3 STANDART DAYANAK Ø 5,0 mm H:1.0 mm
T3 4500	T3 DÜZ DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:0. mm
T3 4501	T3 DÜZ DAYANAK Ø 3.4/3.8/4.2 mm H:1.0 mm
T3 4502	T3 DÜZ DAYANAK Ø 3.4/3.8/4.2 mm H:2.0 mm
T3 5001	T3 DÜZ DAYANAK Ø 5,0 mm H:1.0 mm
T3 5002	T3 DÜZ DAYANAK Ø 5,0 mm H:2.0 mm
T3 4510-10	T3 AÇILI (10°) DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:0. mm
T3 4510-20	T3 AÇILI (20°) DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:0. mm
T3 4510-30	T3 AÇILI (30°) DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:0. mm
T3 4511-20	T3 AÇILI (20°) DAYANAK Ø 3.4/3.8/4.2 mm H:1.0 mm
T3 4512-20	T3 AÇILI (20°) DAYANAK Ø 3.4/3.8/4.2 mm H:2.0 mm
T3 5011-20	T3 AÇILI (20°) DAYANAK Ø 5,0 mm H:1.0 mm
T3 5012-20	T3 AÇILI (20°) DAYANAK Ø 5,0 mm H:2.0 mm
T3 32022	T3 GEÇİCİ DAYANAK Ø 5,0 mm PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN PEEK HEX
T3 32023	T3 GEÇİCİ DAYANAK Ø 5,0 mm PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN PEEK NO-HEX
T3 32034	T3 GEÇİCİ İYİLEŞME BAŞLIĞI Ø 6,0 mm PLATFORM TÜM ÇAPLAR İÇİN PEEK
T3 4515	T3 İYİLEŞME BAŞLIĞI KAPAK Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 2,0 mm
T3 4516	T3 İYİLEŞME BAŞLIĞI KAPAK Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 1,0 mm
T3 4517	T3 İYİLEŞME BAŞLIĞI KAPAK Ø 3.4/3.8/4.2 mm H: 4,0 mm
T3 5015	T3 İYİLEŞME BAŞLIĞI KAPAK Ø 5,0 mm H: 2,0 mm
T3 5016	T3 İYİLEŞME BAŞLIĞI KAPAK Ø 5,0 mm H: 1,0 mm
T3 5017	T3 İYİLEŞME BAŞLIĞI KAPAK Ø 5,0 mm H: 4,0 mm
T3 4940	T3 ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK) TÜM ÇAPLAR İÇİN
T3 4941	T3 ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK) TÜM ÇAPLAR İÇİN NO-HEX
T3 4940-1	T3 ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI) TÜM ÇAPLAR İÇİN
T3 4520	T3 ANALOG Ø 3.4/3.8/4.2 mm
T3 5020	T3 ANALOG Ø 5,0 mm
T0 32910	STANDART DAYANAK ÖLÇÜ KEBİ PVC STANDART PLATFORM
T0 32911	STANDART DAYANAK ÖLÇÜ KEBİ PVC GENİŞ PLATFORM
T0 32912	KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ PARÇALARI İÇİN KEP PVC-SARI 4'lü
T0 2001	M2 VİDA Tpure/T3 GÖVDE VE SİMANTE ABUTMENTLER İÇİN
T0 2001-1	AÇIK KAŞIK ÖLÇÜ PARÇASI İÇİN M2 VİDA
T3 5041	T3 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:1,5 mm
T3 5042	T3 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) TÜM ÇAPLAR İÇİN (NO-HEX) H:3,0 mm
T3 5044	T3 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:1,5 mm
T3 5045	T3 MULTİ ÜNİT DAYANAK(0°) TÜM ÇAPLAR İÇİN (HEX) H:3,0 mm



T3 ÜRÜN LİSTESİ

Kod	Açıklama
T3 5541-17 T3 5542-17	T3 MULTİ ÜNİT DAYANAK(17°) TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,25/2,9 mm T3 MULTİ ÜNİT DAYANAK(17°) TÜM ÇAPLAR İÇİN H:2,0/3,6 mm
T3 5543-30	T3 MULTİ ÜNİT DAYANAK(30°) TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,25/3,8 mm
T0 32905 T0 32901 T0 32902 T0 32908 T0 32904	MULTİ ÜNİT DAYANAK COMFORT KEP (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK BURN-OUT KEP NO-HEX / (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK BURN-OUT KEP HEX Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK TİTANYUM KEP NO-HEX / (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK TİTANYUM KEP HEX Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
T0 32607 T0 32608 T0 32609 T0 32610	MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI / NO-HEX) (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK / NO-HEX) (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (KAPALI / HEX) Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6) MULTİ ÜNİT DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (AÇIK / HEX) Ø 5,0 PLATFORM (T3/Tpure/T5/T6)
T0 32033 T0 32808	CAD-CAM TARAMA PARÇASI (MULTİ UNIT DAYANAK ÜSTÜNDEN) PEEK MULTİ UNIT TİBASE DAYANAK
T0 32203	MULTİ ÜNİT DAYANAK ANALOG (T3/Tpure/T5/T6)
T3 2004 T0 16003 T0 16004 T0 32900	T3 İMPLANT - MULTİ UNIT DAYANAK BAĞLANTI VİDASI 1,6 M VİDA (MULTİ UNIT DAYANAK OKLUZAL VE TÜM KEPLERİ İÇİN) (T3/Tpure/T5/T6) 1,6 M VİDA (MULTİ UNIT DAYANAK AÇIK ÖLÇÜ PARÇASI İÇİN) (T3/Tpure/T5/T6) T3 / Tpure / T5 / T6 KAPALI KAŞIK ÖLÇÜ PARÇALARI İÇİN KEP PVC-SARI 4'lü
T3 5030 T3 5031	T3 TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 1,5 mm T3 TOPUZ DAYANAK TÜM ÇAPLARI İÇİN H: 3,0 mm
T0 32615 T0 4521	TOPUZ DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (T1/T3/Tpure/T5/T6) TOPUZ DAYANAK ANALOG (T1/T3/Tpure/T5/T6)
T0 5207 T0 4500-16 T0 4500-7 T0 5200 T0 4500-3 T0 5201 T0 4500-4 T0 4500-18	KAPALI METAL YUVA VE PLASTİĞİ KAPALI METAL YUVA İÇİN SARI PLASTİK ORTA SERT 4 LÜ KAPALI METAL YUVA İÇİN TURUNCU PLASTİK YUMUŞAK 4 LÜ METAL YÜZÜK VE SİLİKON HALKASI METAL YÜZÜK İÇİN SİLİKON HALKA SİYAH ORTA SERT 4 LÜ METAL KADEH VE PLASTİĞİ METAL KADEH İÇİN PLASTİK 4 LÜ TOPUZ DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASININ SİLİKONU 4 LÜ
T3 5070 T3 5071	T3 EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:1,5 mm T3 EQUATOR DAYANAK TÜM ÇAPLAR İÇİN H:3,0 mm
044CAIN 144AE	EQUATOR DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI EQUATOR DAYANAK ANALOG
CA008 CN051 CN052 CN053 CN068	EQUATOR METAL YUVA 4 LÜ EQUATOR ŞEFFAF KEP EXTRA SERT (1,8 KG) 4 LÜ EQUATOR PEMBE KEP SERT (1,2 KG) 4 LÜ EQUATOR SARI KEP YUMUŞAK (0,6 KG) 4 LÜ EQUATOR SİYAH KEP LABORATUVAR İÇİN 4 LÜ
774CHE 760CE 124ICP-N 191ECS	EQUATOR DAYANAK SIKMA ANAHTARI KARE RAŞETLE EQUATOR DAYANAK SIKMA ANAHTARI MOTOR KEB YERLEŞTİRME APARATI (MAVİ SAP+ METAL UÇ) METAL YUVADAN KEP ÇIKARMA APARATI (ŞEFFAF SAPLI)
T3 5080 T3 5081	T3 UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK NO-HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN T3 UNİVERSAL TİBASE DÖKÜM DAYANAK HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T0 32907 T3 32907 T3 16001	UNİVERSAL DÖKÜM TİBASE DAYANAK BURN-OUT KEB (T3/Tpure/T5/T6) UNİVERSAL DÖKÜM TİBASE DAYANAK BURN-OUT KEB / VİDA İLE BİRLİKTE T3 UNİVERSAL DÖKÜM TİBASE DAYANAK - İMPLANT BAĞLANTI VİDASI
T3 32806 T3 32807	T3 CAD-CAM NUCLEOSS TİBASE DAYANAK HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN T3 CAD-CAM NUCLEOSS TİBASE DAYANAK NO-HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN
T3 32897	T3 / CAD-CAM TARAMA GÖVDESİ PEEK TÜM ÇAPLAR İÇİN
T3 32803	T3 CAD-CAM CEREC TİBASE DAYANAK HEX TÜM ÇAPLAR İÇİN

T1 - T2 ÜRÜN LİSTESİ



Kod	Açıklama
T1 3008	T1 İMPLANT GÖVDE 3,0x08 mm
T1 3010	T1 İMPLANT GÖVDE 3,0x10 mm
T1 3012	T1 İMPLANT GÖVDE 3,0x12 mm
T1 3014	T1 İMPLANT GÖVDE 3,0x14 mm
T2 3008	T2 İMPLANT GÖVDE 3,0x08 mm
T2 3010	T2 İMPLANT GÖVDE 3,0x10 mm
T2 3012	T2 İMPLANT GÖVDE 3,0x12 mm
T2 3014	T2 İMPLANT GÖVDE 3,0x14 mm
T0 32615	TOPUZ DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASI (T1/T3/Tpure/T5/T6)
T0 4521	TOPUZ DAYANAK ANALOG (T1/T3/Tpure/T5/T6)
T2 3920	T2 ANALOG
T0 5207	KAPALI METAL YUVA VE PLASTİĞİ
T0 4500-16	KAPALI METAL YUVA İÇİN SARI PLASTİK ORTA SERT 4 LÜ
T0 4500-7	KAPALI METAL YUVA İÇİN TURUNCU PLASTİK YUMUŞAK 4 LÜ
T0 5200	METAL YÜZÜK VE SİLİKON HALKASI
T0 4500-3	METAL YÜZÜK İÇİN SİLİKON HALKA SİYAH ORTA SERT 4 LÜ
T0 5201	METAL KADEH VE PLASTİĞİ
T0 4500-4	METAL KADEH İÇİN PLASTİK 4 LÜ
T0 4500-18	TOPUZ DAYANAK ÖLÇÜ PARÇASININ SİLİKONU 4 LÜ
CRH-107	T1/T2 CERRAHİ VE PROTEZ SETİ

